

INSTRUMENTOS ROTATORIOS

KENDA

PULIDORES DENTALES

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

GRANDE EN PULIDO
ENORME EN CALIDAD



Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

SOBRE KENDA

- INNOVACIÓN
- SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS PROFESIONALES DE LA ODONTOLOGÍA
- MÁXIMA CALIDAD SWISS MADE
- PRECIOS ASEQUIBLES

KENDA

Pulidores dentales



Grande en pulido. Enorme en **calidad**.



Expertos en pulidores desde 1977

Tecnología probada para la máxima calidad permanente



Vigilamos minuciosamente nuestro proceso de desarrollo

Métodos cuantitativos y cualitativos con inspección visual final al 100 %



Soluciones de pulido para diferentes aplicaciones y materiales

Alto brillo científicamente probado en menos tiempo¹



¹ Dennis T, Zoltie T, Wood D, Altaie A. Reduced-step composite polishing systems - a new gold standard? J Dent. 2021 Sep; 112:103769. doi: 10.1016/j.jdent.2021.103769. Epub 2021 Aug 5. PMID: 34363894.

Información para pedidos

3

2

1

5

ISO 858 206 243 513 055

6

5

ISO 858 205 304 513 100

5

ISO 858 206 030 513 065

5

ISO 852 206 248 515 033

5

ISO 858 205 543 512 140

5

ISO 858 206 250 513 050

5

ISO 858 206 030 513 090

Tipo de pulidor 6, 12, 20, 25, 100 uds.	4	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006
	0301	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012
		.025	.025	.025	.025	.025	.025	.025
		.100	.100	.100	.100	.100	.100	.100
7	Ø mm	5,5	10	6,5	3,3	14	5	9,2
8	L cabezal en mm	13	6,5	10	7,4	2	10	8,3
9	R. P. M.	Rec.	7500 - 10 000				5000 - 7000	7500 - 10 000
10		Máx.	10 000					

11

REF. (set y mues-
tras)

12

0300.006	1	1	1	1	1	1	-
0300.002	-	-	-	-	-	1	-

Número de pedido de 6 pulidores 0306: 0306.006

1

Ilustración

2

Indicaciones de uso

3

pulidores de diamantes

4

Número de modelo de la forma de la cabeza y sistema de pulido

5

Número ISO

6

Tamaño del embalaje

7

Diámetro máximo de la cabeza en milímetros

8

Longitud de la cabeza en milímetros

9

Velocidad de rotación recomendada

10

Velocidad máxima de rotación

11

Números de REF. de sets variados con tamaño de envase

12

Número de cada instrumento dentro del set variado

3


TABLA DE CONTENIDOS

Página	Producto	Aplicación	Flexibilidad
07	 KENDA NOBILIS	PULIDORES DE TODOS LOS COMPOSITES Y CERÁMICAS HÍBRIDAS	Flexible
08	 KENDA UNICUS	PULIDORES DE TODOS LOS COMPOSITES Y CERÁMICAS HÍBRIDAS	Flexible
09	 KENDA MAXIMUS	PULIDORES DE TODOS LOS COMPOSITES Y CERÁMICAS HÍBRIDAS	Flexible
10	 KENDA DELUXE	PULIDORES DE TODOS LOS COMPOSITES Y CERÁMICAS HÍBRIDAS	Flexible
11	KENDA COMPLETO	PULIDORES DE TODOS LOS COMPOSITES, COMPÓMEROS, AMALGAMAS Y ORO	Flexible
12	 KENDA HYBRID	PULIDORES DE COMPOSITES Y CERÁMICAS HÍBRIDAS	Duro
13	KENDA C.G.I.	PULIDORES DE TODOS LOS COMPOSITES, COMPÓMEROS E IONÓMEROS DE VIDRIO	Flexible
14	KENDA MICROFILL	PULIDORES DE COMPOSITES MICRORRELLENOS	Flexible
15	KENDA PROPHY	LIMPIEZA Y PULIDO DENTAL	Flexible
16	 KENDA ALL CERAMIC	PULIDORES DE TODAS LAS CERÁMICAS	Flexible
17	 KENDA METALS	PULIDORES DE TODOS LOS METALES	Duro
19	 KENDA POLISHETTE	PULIDORES DE COMPOSITE Y CERÁMICA HÍBRIDA	Flexible, desechable

PULIDORES CLÍNICOS

MULTIUSOS

Los pulidores disponen de un mango de acero en ángulo recto, esterilizable en autoclave, y deben desinfectarse y esterilizarse antes y después de cada uso. Esterilizar en autoclave a 132° C / 270° F.

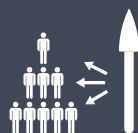

Pulidores de uso intraoral
para múltiples pacientes



Pulidores de uso intraoral
para múltiples pacientes

N

Aplique poca presión
1,5 N

MD

Clase de producto sanitario IIa


132 °C



KENDA NOBILIS

SISTEMA DE PULIDO DIAMANTADO EN 1 PASO

- Pulir todos los composites con el mismo pulidor
- Acabado y brillo sedoso en 1 solo paso
- Pulidor de diamante económico ideal para restauraciones posteriores
- Flexible, se adapta a la forma del diente
- Recomendación: Para restauraciones anteriores, utilice posteriormente los pulidores KENDA Maximus o KENDA Unicus para un pulido de alto brillo definitivo

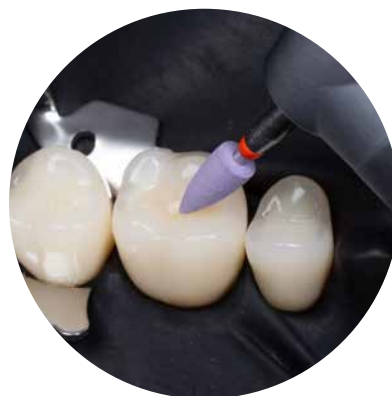

Vídeo de aplicación
Nobilis + Unicus



ISO 858 206 248 513 055



ISO 858 205 304 513 100



ISO 858 206 030 513 065



ISO 852 206 248 515 033



ISO 858 205 548 512 140



ISO 858 206 250 513 050




ISO 858 206 030 513 090



Tipo de pulidor 6, 12, 20, 25, 100 uds.	.006		.006		.006		.006		.006		.006		.006	
	.012		.012		.012		.012		.012		.012		.012	
	.025		.025		.025		.025		.020		.025		.025	
	.100		.100		.100		.100		.100		.100		.100	
Ø mm	5,5		10		6,5		3,3		14		5		9,2	
L cabezal en mm	13		6,5		10		7,4		2		10		8,3	
R. P. M.	Rec.	7500 - 10 000							5000 - 7000		7500 - 10 000			
	Máx.	10 000												

REF. (set y muestras)							
0300.006	1	1	1	1	1	1	-
0300.002	-	-	-	-	-	1	1

3050.006 Set KENDA NOBILIS & UNICUS ¡Ver página 28!

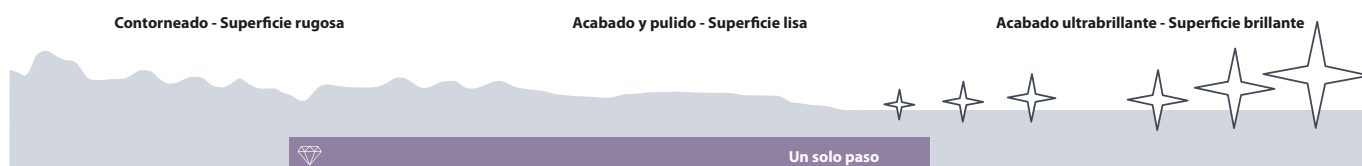

KENDA UNICUS

SISTEMA DE PULIDO DIAMANTADO EN 1 PASO

- Pulir todos los composites con el mismo pulidor
- Para un resultado estético de alto brillo
- Ideal para restauraciones anteriores
- No necesita pasta para pulido de alto brillo
- Recomendación: Utilizar instrumentos de acabado de grano fino o KENDA Nobilis antes de la aplicación




Vídeo de aplicación
Nobilis + Unicus



Tipo de pulidor 6, 12, 20, 25, 100 uds.	.006		.006		.006		.006		.006		.006		.006		
	.012		.012		.012		.012		.012		.012		.012		
	.025		.025		.025		.025		.020		.025		.025		
	.100		.100		.100		.100		.100		.100		.100		
Ø mm	5,5		10		6,5		3,3		14		5		9,2		
L cabezal en mm	13		6,5		10		7,4		2		10		8,3		
R. P. M.	Rec.	5000 - 7500							6000 - 8000			5000 - 7500			
	Máx.	10 000													

REF. (set y mues- tras)							
0350.006	1	1	1	1	1	1	-
0350.002	-	-	-	-	-	1	-

3050.006 Set KENDA NOBILIS & UNICUS ¡Ver página 28!

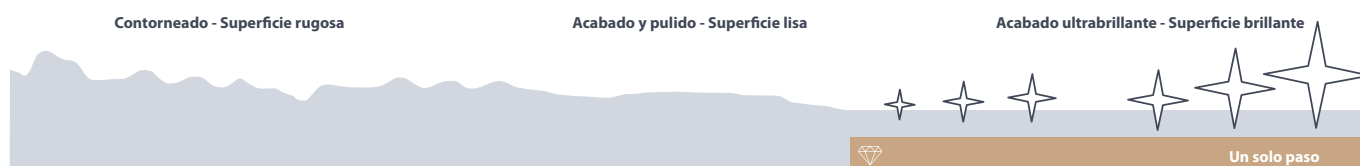

KENDA MAXIMUS

SISTEMA DE PULIDO DIAMANTADO EN 1 PASO

- Pulido extremadamente eficaz y que ahorra tiempo en todos los composites
- De una superficie rayada a un brillo ultra luminoso en un solo paso
- Alto contenido en diamantes
- No necesita pasta para pulido de alto brillo
- Indicado para microhíbridos y nanorrellenos



"Este pulidor ha demostrado dar un brillo significativamente mejor y una superficie más fina".



Vídeo de aplicación
Nobilis+Maximus



ISO 828 206 243 494 055



ISO 828 205 304 493 100



ISO 828 206 030 493 06



ISO 828 206 248 494 033



ISO 828 205 543 492 140



ISO 828 206 250 493 050



ISO 828 206 030 493 090



Tipo de pulidor 6, 12, 20, 25, 100 uds.	0381				0383				0385				0386				0387				0388				0390			
	.006				.006				.006				.006				.006				.006							
	.012				.012				.012				.012				.012				.012							
	.025				.025				.025				.025				.020				.025							
	.100				.100				.100				.100				.100				.100							
Ø mm	5,5				10				6,5				3,3				14				5				9,2			
L cabezal en mm	13				6,5				10				7,4				2				10				8,3			
R. P. M.	Rec.	5000 - 7500												6000 - 8000				5000 - 7500										
	Máx.	10 000																										

REF. (set y muestras)							
0380.006	1	1	1	1	1	1	-
0380.002	-	-	-	-	-	1	-

Contorneado - Superficie rugosa

Acabado y pulido - Superficie lisa

Acabado ultrabrillante - Superficie brillante



KENDA DELUXE

SISTEMA DE PULIDO DIAMANTADO EN 2 PASOS


- Combinación de lujo de doble diamante para el pulido estético y de alto brillo en todas las restauraciones de composite
- Excelente elección para odontología estética
- No necesita pasta adicional para pulido de alto brillo



Vídeo de aplicación

Paso 1: Pulido inicial						Paso 2: Pulido final					
ISO 858 206 030 513 065						ISO 838 206 030 503 065					
ISO 852 206 248 515 033						ISO 838 206 248 504 033					
ISO 858 205 543 512 140						ISO 838 205 543 502 140					
ISO 858 206 250 513 050						ISO 838 206 250 503 050					
ISO 858 205 304 513 100						ISO 838 205 304 503 100					
Tipo de pulidor	0405	0406	0407	0408	0409	0455	0456	0457	0458	0459	
6, 12, 20, 25, 100 uds.	.006 .012 .025 .100	.006 .012 .025 .100	.006 .012 .020 .100	.006 .012 .025 .100	.006 .012 .025 .100	.006 .012 .025 .100	.006 .012 .025 .100	.006 .012 .025 .100	.006 .012 .025 .100	.006 .012 .025 .100	
Ø mm	6,5	3,3	14	5	10	6,5	3,3	14	5	10	
L cabezal en mm	10	7,4	2	10	5,5	10	7,4	2	10	5,5	
R. P. M.	Rec.	7500 - 10 000	5000 - 7000	7500 - 10 000		5000 - 7500	6000 - 8000	5000 - 7500			
	Máx.		10 000				10 000				

REF. (set y muestras)										
0400.012	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1
0400.003	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-

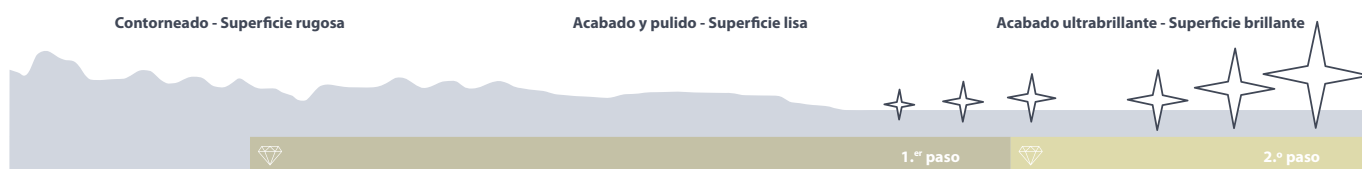

KENDA COMPLETO

SISTEMA DE PULIDO EN 2 PASOS

- Sistema multifuncional equilibrado para una amplia gama de materiales de restauración
- Pulidores económicos con abrasivos de alto rendimiento
- Disponible en las formas más habituales
- Mayor brillo en comparación con otros sistemas Kenda sin diamante
- Puede utilizarse para eliminar residuos de cemento tras la fijación de la restauración
- Adecuado para eliminar residuos de composite tras tratamientos de ortodoncia o alineadores




Vídeo de aplicación



																	
																	
																	
																	
																	
Tipo de pulidor 6, 12, 25, 100 uds.	0505	.006	0508	.006	0509	.006	0510	.006	0555	.006	0558	.006	0559	.006	0560	.006	
		.012		.012		.012		.012		.012		.012		.012		.012	
		.025		.025		.025		.025		.025		.025		.025		.025	
		.100		.100		.100		.100		.100		.100		.100		.100	
	Ø mm	6,5		5		10		9,2		6,5		5		10		9,2	
L cabezal en mm	10		10		5,5		8,3		10		10		5,5		8,3		
R. P. M.	Rec.	7500 - 10 000								5000 - 7500							
	Máx.	10 000								10 000							

REF. (set y mues- tras)	0500.012A				0500.002			
	2	2	2	-	2	2	2	-
	-	1	-	-	-	1	-	-

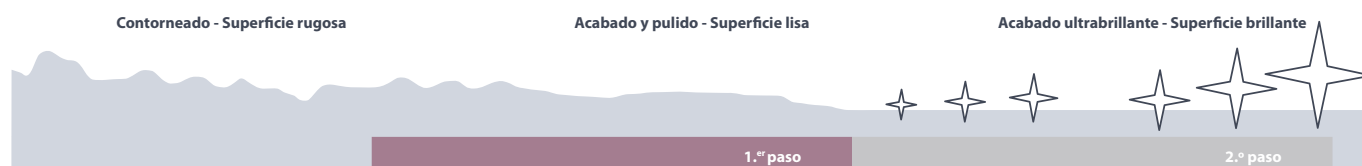

KENDA HYBRID

SISTEMA DE PULIDO DIAMANTADO EN 2 PASOS


- Desarrollado para composites híbridos y cerámicos
- El pulidor firme y robusto facilita los ajustes exactos
- El prepulidor sin diamante y el pulidor de alto brillo con diamante de Kenda son la mejor combinación económica para obtener resultados altamente estéticos
- Proporciona superficies ultrasuaves de alto brillo



Vídeo de aplicación

ISO 638 206 030 524 065						ISO 838 206 030 504 065				
Tipo de pulidor 6, 12, 20, 25, 100 uds.	.006		.006		.006		.006		.006	
	.012		.012		.012		.012		.012	
	.025		.025		.025		.025		.025	
	.100		.100		.100		.100		.100	
Ø mm	6,5		3,3		14		5		10	
L. cabezal en mm	10		7,4		2		10		5,5	
R. P. M.	Rec.		7500 - 10 000		5000 - 7000		7500 - 10 000		5000 - 7500	
	Máx.		10 000		10 000		10 000		10 000	

REF. (set y mues- tras)										
0100.012	1	2	1	1	1	1	2	1	1	-
0100.003	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-

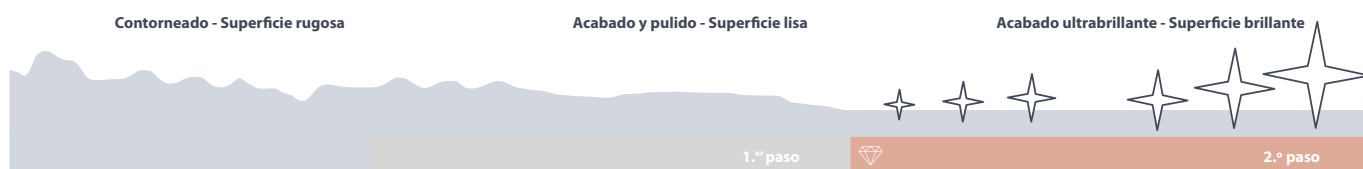

KENDA C.G.I.

SISTEMA DE PULIDO EN 3 PASOS


- Sistema de pulido integral con tres granos
- Abarca todo el proceso, desde el contorneado y el acabado hasta el pulido de brillo
- Flexible, se adapta a la forma del diente
- El pulidor blanco elimina rápidamente el exceso de material
- Puede utilizarse para eliminar residuos de cemento tras la fijación de la restauración
- Adecuado para eliminar residuos de composite tras tratamientos de ortodoncia o alineadores



Vídeo de aplicación

																	
																	
																	
																	
																	
																	
ISO 638 206 030 513 065						ISO 638 206 030 513 065						ISO 638 206 030 493 065					
ISO 638 205 543 512 140						ISO 638 205 543 512 140						ISO 638 205 543 492 140					
ISO 638 206 250 513 050						ISO 638 206 250 513 050						ISO 638 206 250 493 050					
ISO 638 205 304 513 100						ISO 638 205 304 513 100						ISO 638 205 304 493 100					
ISO 638 206 030 513 090						ISO 638 206 030 513 090						ISO 638 206 030 493 090					
Tipo de pulidor 6, 12, 20, 25, 100 uds.	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006		
	905.C	907.C	908.C	909.C	910.C	905.M	907.M	908.M	909.M	910.M	905.F	907.F	908.F	909.F	910.F		
	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012		
	.025	.020	.025	.025	.025	.025	.020	.025	.025	.025	.025	.020	.025	.025	.025		
	.100	.100	.100	.100	.100	.100	.100	.100	.100	.100	.100	.100	.100	.100	.100		
Ø mm	6,5	14	5	10	9,2	6,5	14	5	10	9,2	6,5	14	5	10	9,2		
L cabezal en mm	10	2	10	5,5	8,3	10	2	10	5,5	8,3	10	2	10	5,5	8,3		
R. P. M.	Rec.	7500 - 10 000	5000 - 7000	7500 - 10 000		3000 - 7500	6000 - 8000	3000 - 7500			3000 - 7500	6000 - 8000	3000 - 7500				
	Máx.	10 000				10 000					10 000						

REF. (set y muestras)															
900.012	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-
900.ASS.012	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1
AD 900.ASS.006	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-
AD 900.ASS.007	1	-	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-
SA900.ASS.012	2	-	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	2	-	-
907.003	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
908.003	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-

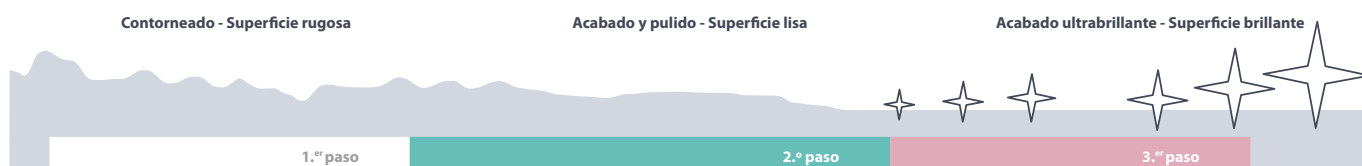


KENDA MICROFILL

SISTEMA DE PULIDO EN 2 PASOS

- Diseñado para composites microrrellenos
- Sistema de pulido básico de eficacia probada en 2 pasos
- Disponible en una gran variedad de formas

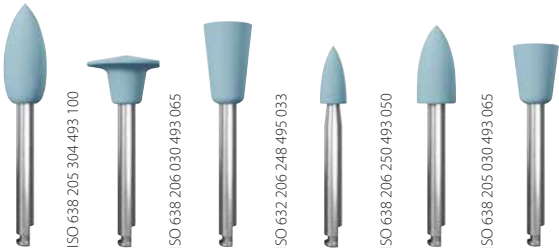


																								
Tipo de pulidor 6, 12, 25, 100 uds.	4001	.006	4003	.006	4005	.006	4006	.006	4008	.006	4011	.006	5001	.006	5003	.006	5005	.006	5006	.006	5008	.006	5011	.006
		.012		.012		.012		.012		.012		.012		.012		.012		.012		.012		.012		.012
		.025		.025		.025		.025		.025		.025		.025		.025		.025		.025		.025		.025
		.100		.100		.100		.100		.100		.100		.100		.100		.100		.100		.100		.100
Ø mm		5,5		10		6,5		3,3		5		6,4		5,5		10		6,5		3,3		5		6,4
L cabezal en mm		13		6,5		10		7,4		10		7,5		13		6,5		10		7,4		10		7,5
R. P. M.	Rec.	7500 - 10 000											5000 - 7500											
	Máx.	10 000											10 000											

[illegible]

Contorneado - Superfície rugosa

Acabado y pulido - Superficie lisa

Acabado ultrabrillante - Superficie brillante

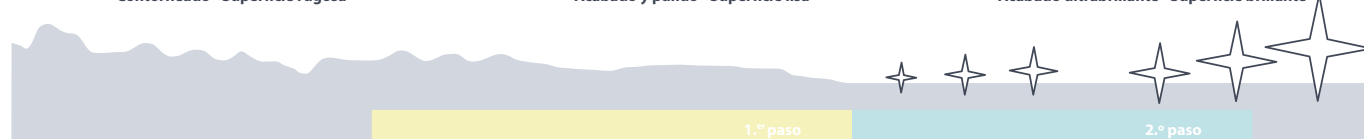

KENDA PROPHY


SISTEMA DE PULIDO EN 1 PASO

- Para la limpieza dental en esmalte natural
- Puede utilizarse para reducir las manchas extrínsecas sin pasta de pulir
- El grano abrasivo fino ya está intercalado en el cabezal
- Diseño firme para facilitar el control durante el pulido
- Adecuado para eliminar residuos de composite tras tratamientos de ortodoncia o alineadores



Tipo de pulidor 6, 12, 25, 100 uds.	5105	.006	5106	.006	5108	.006	5110	.006
		.012		.012		.012		.012
		.025		.025		.025		.025
		.100		.100		.100		.100
Ø mm	6,5	3,3	5	9,2				
L cabezal en mm	10	7,4	10	8,3				
R. P. M.	Rec.	7500 - 10 000						
	Máx.	10 000						

REF. (set y muestras)				
5100.012	3	3	3	3

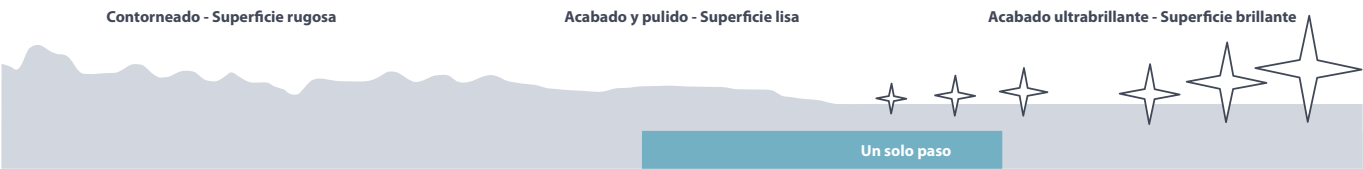

KENDA ALL CERAMIC

SISTEMA DE PULIDO DIAMANTADO EN 3 PASOS

- Pulidor para todas las restauraciones cerámicas, incluyendo circonio y disilicato de litio
- El primer paso para el acabado rugoso, el segundo y el tercero, para el pulido y el pulido de alto brillo



La ciencia del pulido cerámico:

- Se ha informado de que las superficies pulidas son más suaves para el diente antagonista que con el glaseado.¹
- Además, se ha demostrado que el pulido de la cerámica mejora sus propiedades mecánicas.²



Vídeo de aplicación

 						 						 					
 ISO 872 206 030 535 065						 ISO 862 206 030 525 065						 ISO 858 206 030 514 065					
 ISO 872 206 248 535 033						 ISO 862 206 248 525 033						 ISO 858 206 248 514 033					
 ISO 878 205 543 532 140						 ISO 868 205 543 522 140						 ISO 858 205 543 512 140					
 ISO 872 206 250 535 050						 ISO 862 206 250 525 050						 ISO 858 206 250 514 050					
 ISO 872 205 304 535 100						 ISO 862 205 304 525 100						 ISO 858 205 304 514 100					
Tipo de pulidor 6, 12, 20, 25, 100 uds.	.006		.006		.006		.006		.006		.006		.006		.006		
	.012		.012		.012		.012		.012		.012		.012		.012		
	.025		.025		.020		.025		.025		.025		.020		.025		
	.100		.100		.100		.100		.100		.100		.100		.100		
Ø mm	6,5		3,3		14		5		10		6,5		3,3		14		
L cabezal en mm	10		7,4		2		10		5,5		10		7,4		2		
R. P. M.	Rec.		7500 - 10 000		5000 - 7000		7500 - 10 000		7500 - 10 000		5000 - 7500		6000 - 8000		5000 - 7500		
	Máx.		10 000				10 000				10 000						

REF. (set y mues- tras)															
0200.012	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1



¹ Janyavula S, Lawson N, Cakir D, Beck P, Ramp LC, Burgess JO (2013) The wear of polished and glazed zirconia against enamel. J Prosthet Dent 109:22-29. [https://doi.org/10.1016/S0022-3913\(13\)00000-0](https://doi.org/10.1016/S0022-3913(13)00000-0)

² Vohra M, Pandurangan KK, Shenoy A, Keskar V. A Comprehensive Review of the Surface and Chromatic Properties of Monolithic Zirconia: Evaluating the Impact of Polishing and Finishing Methods on Aesthetics and Performance. Cureus. 2024 Aug 2;16(8):e66029. doi: 10.7759/cureus.66029. PMID: 39221297; PMCID: PMC11366407.

KENDA METALS


SISTEMA DE PULIDO EN 2 PASOS

- Solución de pulido estético para todos los metales
- Combinación económica de prepulidor sin diamante y pulidor de alto brillo con diamante
- Resultados de brillo espejo



					 					
										
										
										
										
ISO 652 206 030 525 065					ISO 852 206 030 515 065					
ISO 652 206 248 525 033					ISO 852 206 248 515 033					
ISO 652 206 250 525 050					ISO 852 206 250 515 050					
ISO 652 205 304 525 100					ISO 852 205 304 515 100					
Tipo de pulidor 6, 12, 20, 25, 100 uds.	.006		.006		.006		.006		.006	
	.012		.012		.012		.012		.012	
	.025		.025		.025		.025		.025	
	.100		.100		.100		.100		.100	
	.100		.100		.100		.100		.100	
Ø mm	6,5		3,3		5		10		6,5	
L cabezal en mm	10		7,4		10		5,5		10	
R. P. M.	Rec.	7500 - 10 000							5000 - 7500	
	Máx.	10 000							10 000	

REF. (set y mues- tras)								
1000.006	1	-	1	1	1	-	1	1
1000.012	2	2	1	1	2	2	1	1
1000.002	-	-	1	-	-	-	1	-

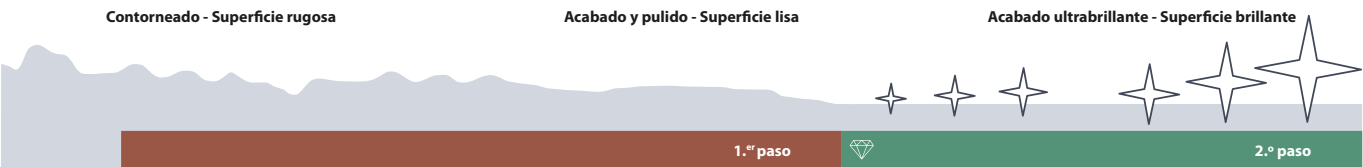

PULIDORES CLÍNICOS DE UN SOLO USO


Los pulidores presentan un mango de polímero de alto rendimiento, en ángulo recto y esterilizable en autoclave, y deben desinfectarse y esterilizarse antes del primer uso. Esterilizar en autoclave a 132° C / 270° F.



Pulidores para uso intraoral en un solo paciente. Reduce el riesgo de contaminación cruzada.



Los pulidores de un solo uso siempre hacen que el procedimiento de pulido comience con un pulidor de forma perfecta para un pulido más preciso.

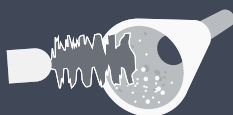

Sin necesidad de limpieza ni reprocesamiento.

N

Aplique poca presión
1,5 N

MD

Clase de producto sanitario IIa



Pulidores de uso intraoral para múltiples pacientes



KENDA Polishette

SISTEMA DE PULIDO EN 3 PASOS


- Adecuado para el contorneado, acabado y pulido de alto brillo de todo tipo de composites
- Se puede aplicar sin pasta de pulir.
- Los pulidores en miniatura con cuello de mango cónico garantizan un manejo preciso y sencillo, incluso en zonas de difícil acceso y para pacientes con cavidad bucal pequeña
- Excelente acceso y visibilidad
- Un solo uso para mayor comodidad, menos tiempo de limpieza y formas siempre perfectas
- Los eliminadores del primer escalón podrían sustituir a los ajustes de diamante y carburo
- Produce un brillo superior en comparación con el sistema tradicional de pulido en varios pasos¹
- Permite una reducción significativa del tiempo de consulta en la clínica y un pulido más rápido¹



Vídeo de aplicación

						 							
		ISO 658 245 030 533 065		ISO 658 246 248 523 030		ISO 638 245 030 523 065		ISO 638 246 248 523 030		ISO 838 245 030 503 065		ISO 838 246 248 503 030	
Tipo de pulidor 6, 15, 30 uds.		PS715C	.006 - .030	PS716C	.006 - .030	PS715M	.006 - .030	PS716M	.006 - .030	PS715F	.006 .015 -	PS716F	.006 .015 -
	Ø mm	6,4	3	6,4	3	6,4	3	6,4	3	6,4	3		
	L cabezal en mm	5,5	7	5,5	7	5,5	7	5,5	7				
R. P. M.	Rec.	5000 - 7500	5000 - 7500	5000 - 7500	5000 - 7500	5000 - 7500	5000 - 7500	5000 - 7500	5000 - 7500				
	Máx.	7'500		7'500		7'500							

REF. (set y muestras)						
PS710X.006	1	1	1	1	1	1
PS710X.024	5	5	5	5	2	2
PS715X.024	10	-	10	-	4	-
PS716X.024	-	10	-	10	-	4
PS715X.003	1	-	1	-	1	-

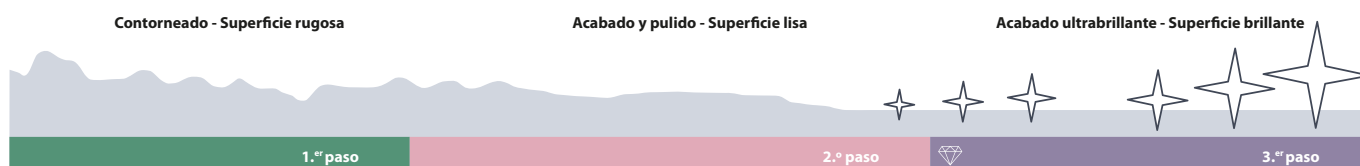

¹ Dennis T, Zoltie T, Wood D, Altaie A. Reduced-step composite polishing systems - a new gold standard? J Dent. 2021 Sep;112:103769. doi: 10.1016/j.jdent.2021.103769. Epub 2021 Aug 5. PMID: 34363894.

SETS MIXTOS KENDA

Set KENDA NOBILIS & UNICUS



N.º de pedido	3050.006 Set KENDA NOBILIS & UNICUS					
Tipo de pulidor	0303	0305	0306	0308	0355	0358
Unidades	1	1	1	1	1	1
Ø mm	10	6,5	3,3	5	6,5	5
L cabezal en mm	6,5	10	7,4	10	10	10
R. P. M.	Rec.			5000 - 7500		
	Máx.			10 000		

KENDA ShapeGuards

NUEVO

- **Universal.**
ShapeGuard está diseñado para adaptarse a múltiples aplicaciones con una sola forma.
- **Duradero y multiuso.**
ShapeGuard es reutilizable y puede esterilizarse varias veces.
- **Rápido.**
Un instrumento para todas las superficies. No es necesario cambiar de instrumento.
- **Trabajo limpio.**
Se puede aplicar sin pasta de pulir.
- **Pulido de alto brillo con unos resultados excelentes.**
- **Disponible en varios sistemas para diferentes materiales dentales.**



LA CONSTRUCCIÓN DE UN PULIDOR DENTAL

Cabezal de pulido

1


El cabezal de pulido está compuesto de silicona o goma sintética mezclada con partículas abrasivas de diamante, carburo de silicio u óxido de aluminio. Las distintas mezclas proporcionan los efectos de pulido requeridos.

Todos los pulidores KENDA contienen partículas abrasivas y no necesitan pasta de pulir.

Mango

2

El mango de los pulidores puede ser de acero inoxidable o de plástico, de un solo uso o de varios, respectivamente.

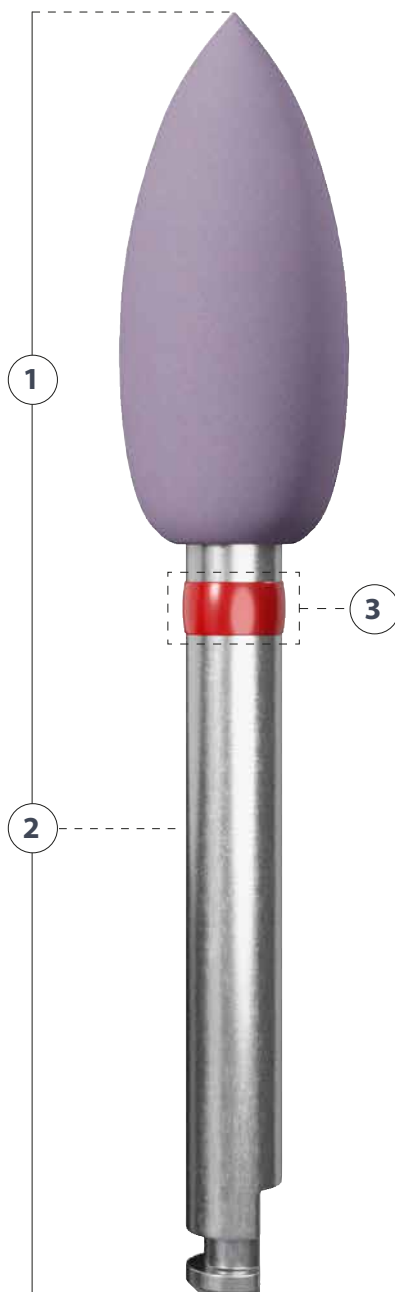

Anillo de color

3

Los anillos de colores del mango indican los diferentes tamaños de grano de diamante según la norma ISO 21671.

Tamaño de grano de color en micras

- ☐ ultrafino 4 - 1 μ
- ☐ extrafino 8 - 4 μ
- ☐ fino 32 - 8 μ
- ☐ medio 69 - 32 μ
- ☐ grueso 164 - 69 μ
- ☐ muy grueso >164 μ

Contraángulo RA Ø 2,35 mm



LOS SIGNOS DE UN VISTAZO

Aparecerán pictogramas para indicar el uso específico del instrumento.

	Pulidor para alisado y acabado		Partículas de diamante como material de la pieza de trabajo para un pulido eficaz
	Pulidor para acabado y pulido brillo sedoso		Velocidad máxima R. P. M.
	Pulidor de alto brillo		Velocidad recomendada en R. P. M. para obtener los mejores resultados de pulido.
	Esterilizable en esterilizador de vapor (autoclave) a la temperatura especificada		No reutilizable
	Número de referencia		Marca de Conformidad Europea
	Código de lote		Manténgase seco
	Fecha de caducidad		Límite de temperatura
	Fabricante legal		Mantener alejado de la luz del sol
	Fecha de fabricación		Producto sanitario
	Consulte las instrucciones de uso		Importador
	Sentido de giro de ShapeGuard		No estéril
	Marca de conformidad Ucrania		Atención. Siga las instrucciones generales de aplicación y seguridad
	Representante europeo autorizado		Contenido del embalaje
	Dispositivo restringido al uso profesional	Código ISO del instrumento: 000 00 0 000 000 000 A B C D E F A. Material de la parte activa B. Tipo de mango o diámetro del orificio C. Longitud total D. Forma E. Características específicas: tamaño de grano F. Tamaño nominal de la parte activa (diámetro del cabezal)	
	Identificador único de producto		
	Tamaño del embalaje		
	Presión máx.		
	Pulverizador H ₂ O		

FORMAS Y USO DEL PULIDOR

PUNTAS

Las puntas son ideales para pulir tanto la zona cervical como los surcos y relieves oclusales. Algunos sistemas disponen de hasta cuatro puntas y tamaños diferentes para satisfacer las preferencias de cada dentista.



CUPS

Hay tres tamaños de copa diferentes. Pueden utilizarse en diferentes áreas de aplicación, como en las inclinaciones de las cúspides de los dientes posteriores, en las áreas proximales de los ángulos de línea y en las superficies bucales, linguales y palatinas de las restauraciones anteriores.



DISCOS

Hay dos tipos de discos. Ambos son ideales en incisivos, grandes superficies de relleno, bordes incisales y zonas interproximales.



SHAPEGUARD

ShapeGuard está diseñado para adaptarse a múltiples aplicaciones con una sola forma. Gracias a las láminas flexibles, el pulidor ShapeGuard distribuye una presión uniforme. Un instrumento para todas las superficies. No es necesario cambiar de instrumento.



SISTEMAS DE PULIDO



SISTEMA DE PULIDO EN 1 PASO

Este sistema contiene un único pulidor que suele tener partículas de diamante como abrasivo. Consigue buenos resultados de pulido únicamente mediante la aplicación de presión alterada por parte del dentista. El usuario pule previamente con más presión y consigue un brillo intenso reduciendo la presión. Este es el método más eficaz en cuanto al tiempo necesario.

SISTEMA DE PULIDO EN 2 PASOS

Este es el sistema de pulido más utilizado. Solo contiene dos pulidores: un prepulidor de grano medio y un pulidor de alto brillo de grano fino.



SISTEMA DE PULIDO EN 3 PASOS

El sistema de pulido en tres pasos viene con tres pulidores de diferentes tamaños de grano.



El primer paso consiste en eliminar el exceso de material y contornear la restauración para prepararla para el pulido.



El segundo paso consiste en alisar la superficie.



El tercer y último paso da a la restauración un acabado de alto brillo.

ENVASES KENDA

Nuestros pulidores están disponibles en Starter-Kits y cajas de recambios

Cajas de recambios

Contienen una cantidad diferente de una forma específica en un grano específico.

Caja de recambio de 6 o 12 pulidores

Kits de inicio

Contienen diferentes pulidores, comprenden todos los tamaños de grano ofrecidos para un sistema específico e incluyen diversas formas.



Caja de recambios de 20 o 25 pulidores



Caja de recambios de 100 pulidores a GRANEL