



“Tu empresa de confianza, con más de 35 años de experiencia en el sector”

Reciba su pedido en tan solo 24h:  606997834  965361020

-PRECISIÓN SUIZA

-ERGONOMÍA

-ARTESANÍA

-CALIDAD

-RESPALDADO POR PROFESIONALES



CARACTERÍSTICAS:



2) MONOBLOQUE

-Sin soldaduras ni uniones:

- Más Precisión (como si el instrumento fuera una extensión de la mano)
- Más Higiénico



1) ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO

-Ni alergias ni intoxicaciones

3) MANGOS

- Grip no pegajoso
- Para hombres y mujeres
- Octogonal:
 - Respeta los dedos
 - Siempre estable, no rueda en la mesa



MANGO CON FG



CLÁSICO

4) NO ESTÁN RECUBIERTOS DE NINGUNA CAPA:

-No sueltan micropartículas en la boca del paciente.
-El filo es muchísimo mayor y duran hasta 5 veces más que la competencia.

5) BALANCE DEL PESO PERFECTO

-Diseñadas por ergonomistas:

- Ni muy ligeras = (dan menos estabilidad)
- Ni muy pesadas = dolor muñecas (síndrome túnel carpiano)



Instrumental idóneo para endodoncias




EXPLORADORES: GR16 & EXPLORA



Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

- En comparación con un explorador endodóntico estándar, **Explora** es **más largo, más fino, más afilado y más flexible**
- Para conductos muy calcificados, **la calidad del explorador son fundamentales**
- La punta, flexible pero resistente, proporciona una **excelente sensibilidad táctil**

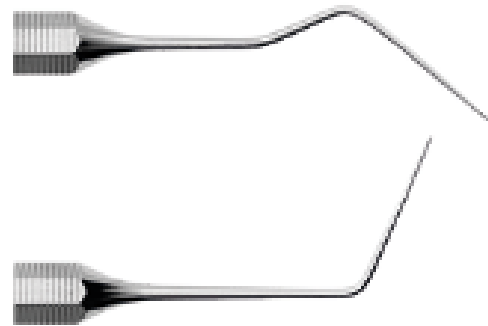

Root canal probe | GR16

Ø 0.35 mm

Very thin root canal probe




Long explorer | Explora

- Root canal scouting at any level
- Manage intracanal obstacles

EVALUAR PROFUNDIDAD- MisurEndo



Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

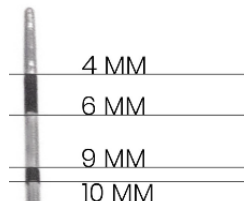

CREA UN ACCESO A LA CAVIDAD CORRECTO Y SEGURO => Ayuda a evaluar la profundidad de la cavidad (para principiantes y casos de conductos calcificados)

-Lado amarillo: sonda endodóntica convencional con marcación láser de profundidad.


-Lado rojo: sonda especial para cavidad de acceso.

Marcación de profundidad: **4/6/9/10 mm**

•**4/6 mm**= estás llegando a alguna zona desde el **techo de la cámara pulpar hasta el suelo**. Si alcanzas esta profundidad, ya deberías sentir la sensación de vacío característica de la cámara pulpar.

•**6/9 mm**= posiblemente ya has pasado el **suelo de la cámara pulpar**. Si llegas a esta profundidad y aún no has sentido la sensación de vacío, necesitas confirmar tu ubicación con una radiografía.

•**9/10 mm** = se ha creado una **perforación furcal**. Esta profundidad debe evitarse.

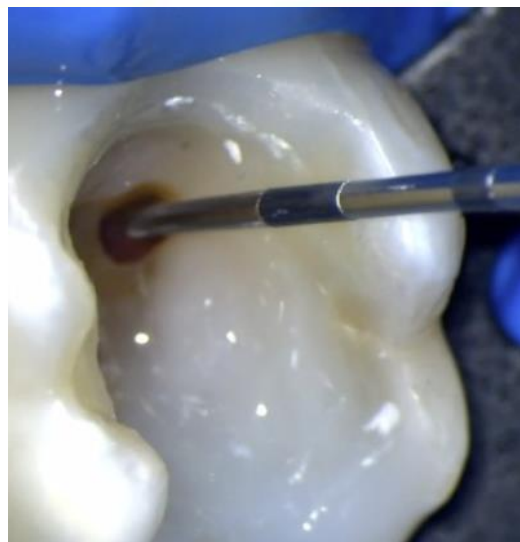

ACCESO CONDUCTOS LARGOS – EXTENDO




Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

ACCESO A CONDUCTOS LARGOS


El cono de gutapercha puede ser más corto que la longitud de trabajo, por lo que puede deslizarse dentro del conducto y dejar de ser visible.

ExtEndo permite sujetar el cono de gutapercha de forma firme, **extender su longitud** y verificar el ajuste del cono antes de realizar la técnica de compactación vertical caliente.

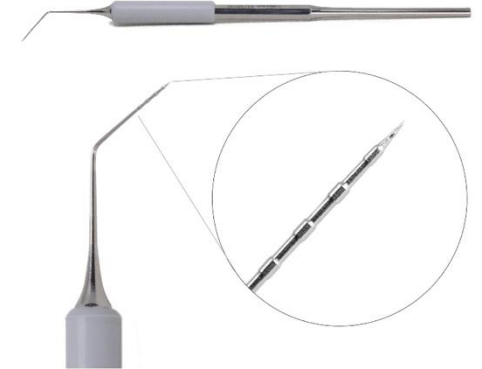

ELIMINACIÓN DE MATERIALES DE OBTURACIÓN DE LAS PAREDES

En casos de retratamiento, puedes eliminar la gutapercha a lo largo de las paredes del conducto con **ExtEndo** (cuando la gutapercha se vuelve demasiado blanda, es difícil retirarla con ultrasonidos o sistemas rotatorios para eso puedes utilizar **ExtEndo**).

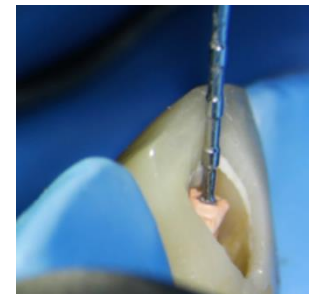

MICRO EXCAVADORES PARA RETRATAMIENTOS



Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

MiniX1

Mesial/Distal



 **DEPPeler**
Signature of excellence



MiniX2

Derecha/Izquierda



 **DEPPeler**
Signature of excellence



El diseño micro de este microexcavador es perfecto para:

Tratamientos endodónticos primarios: acceso y análisis de la cavidad, especialmente en ápices amplios y dientes inmaduros.

Retratamientos: en casos de perforaciones y reabsorciones internas. Ayuda al operador a eliminar los restos y detritos.


CONDENSADORES-PLUGGERS: PREXOS

“**Prexo S/M/L** representa un sistema completo para la condensación de gutapercha termoplastificada en conductos radiculares de diferentes tamaños y conicidades.

La forma de la pieza terminal le permite **adaptarse a la gutapercha** presente en el conducto, evitando vacíos.


Prexo M y L también pueden utilizarse para materiales biológicos como BC Putty y MTA dentro de la cámara pulpar o en cualquier nivel del sistema de conductos radiculares.”

Dr. Riccardo Tonini, Brescia, Italia.

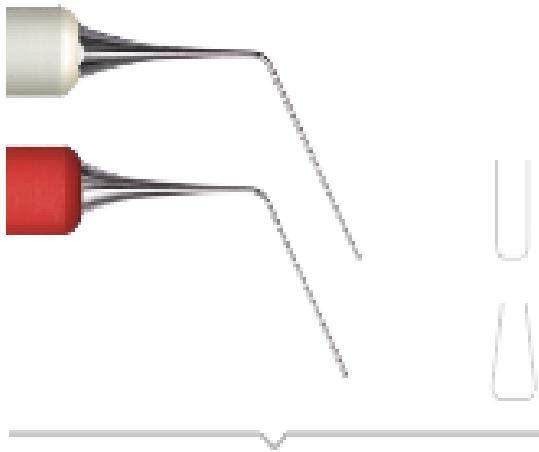


Endodontic plugger I Prexo S

Grey side: 21 mm, Ø 0.45 mm
Red side: 21 mm, Ø 0.7 mm

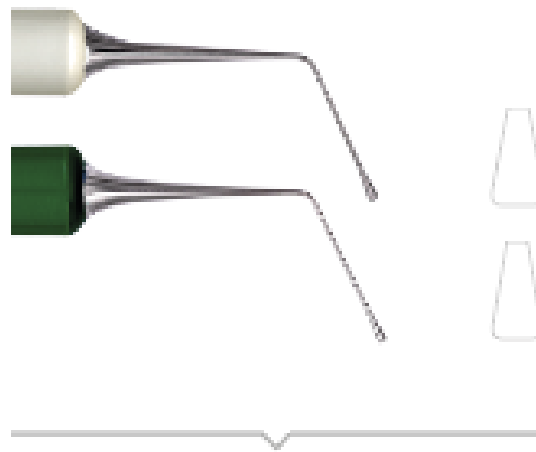

Endodontic plugger I Prexo M

Grey side: 19 mm, Ø 0.85 mm
Green side: 17 mm, Ø 1.05 mm

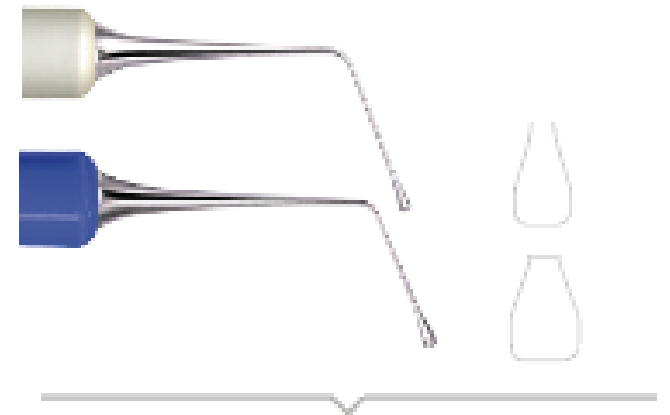

Endodontic plugger I Prexo L

Grey side: 17 mm, Ø 1.2 mm
Blue side: 15 mm, Ø 1.4 mm

El **KIT DE MICROCIRUGÍA APICAL** ha sido diseñado en colaboración con el grupo **Style Italiano Endodontics**. Está compuesto por solo 5 instrumentos, que cubren todas las necesidades del clínico durante este procedimiento extremadamente preciso.



Micro Apical Surgery Kit | KITSIE + FG

In this kit:

- Periosteal elevator | SIE3 + FG V
- Curette | VA21 + FG R
- Ball plugger-spatula | VA10 + FG G / J
- Explorer-plugger | SIE1 + FG J / B
- Plugger | SIE2 + FG B
- Sterilization box | CLEANext B5



Watch the
video of the
technique



“La cirugía endodóntica requiere una gran precisión. Por este motivo, la elección del instrumental quirúrgico debe evaluarse en detalle. El kit de microcirugía apical de Deppeler es exactamente lo que necesitamos para realizar la mejor cirugía posible.”

Prof. Dr. Fabio G.M. Gorni, DDS, Milano, Italy



KIT MICROCIRUGÍA APICAL




Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

	Pasos del procedimiento	En el KIT
1	Elevación del colgajo	Periostotomo (SIE3+FGV) de doble curvatura, con dos tamaños diferentes en cada extremo. Se utiliza para una disección precisa del tejido perióstico sin dañar los tejidos.
2 & 3	Resección del extremo radicular perpendicular al eje largo de la raíz	Cureta (VA21+FGR) . Cureta quirúrgica doble con forma de excavador, con un filo mucho más afilado que permite una eliminación rápida y eficiente de la lesión.
5	Inspección de la superficie radicular reseca para microestructuras	Explorador-condensador (SIE1+FG J/B) . Un instrumento realmente innovador. Por un lado, un explorador fino, puntiagudo y flexible de 4 mm para una correcta localización de los conductos tras la resección apical. Por el otro lado, un condensador largo con punta plana, bordes redondeados y forma cónica invertida que permite adaptar perfectamente el material de obturación, evitando que se desplace al retirar el instrumento. Longitud de 6 mm, ideal para conductos largos y rectos.
6	Preparación de una microcavidad en el extremo radicular	Condensador-espátulada esférica (VA10+FG G/J). El estándar de oro. Por un lado, una espátula delgada y angulada para la aplicación retrógrada del material de obturación, y por el otro, una bola para la primera adaptación del material. Condensador (SIE2+FG B). Condensador doble, mismo diámetro, diferentes longitudes. Punta plana con bordes redondeados y forma cónica invertida.



1. Incision & flap elevation

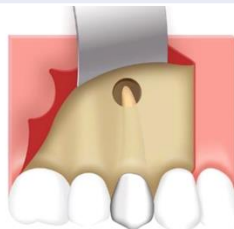

2. Osteotomy



3. Curettage



4. Root end resection



5. Inspection



6. Root end preparation



7. Root and filling



VA4



VA5



VA6

MICROESPEJOS

Grosor punta: 0.35mm
-Monobloque de acero inoxidable
-Sin soldaduras ni uniones



ESPEJOS



Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

- **Ergonómico** para el profesional & el paciente (no le hace daño al apoyarlo sobre su labio)
- **Recubrimiento de Rodio** (proporciona efecto antiadherente y resistente frente a ácidos)
- **Acero inoxidable satinado** (evita reflejos indeseados durante el uso clínico)
- **Higiénico** (Fabricado en una sola pieza, sin soldaduras donde puedan acumularse residuos)



Espejo por
ambas caras

2 opciones:



MIR-SDMS-N
Por una cara



MIR-DDMS-N
Por ambas caras



Multiplo: puede acoplarse al mango del espejo y le sirve de guía para limas rotatorias y manuales, y para ajustar la longitud del cono de gutapercha.

En uno de los extremos dispone de un espacio específico para recoger cementos selladores premezclados.

Las dos ranuras, izquierda y derecha, sirven para guiar el cono de gutapercha mientras se impregna con el sellador.



Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

PINZAS



Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020



EZI70

Pinzas Fuertes



P96

Meriam



P10

College



P15

Punta con diamante natural
para mejor agarre
College




dentacare
SWISS DENTAL PRODUCTS

Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

**NUESTROS SETS FRESAS DE ENDODONCIA ESTÁN
DISEÑADOS POR PROFESIONALES QUE CUENTAN CON
MUCHOS AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA ODONTOLOGÍA**

Puede escoger **el set entero** o la fresa que
más le guste en cajitas de **5 unidades**

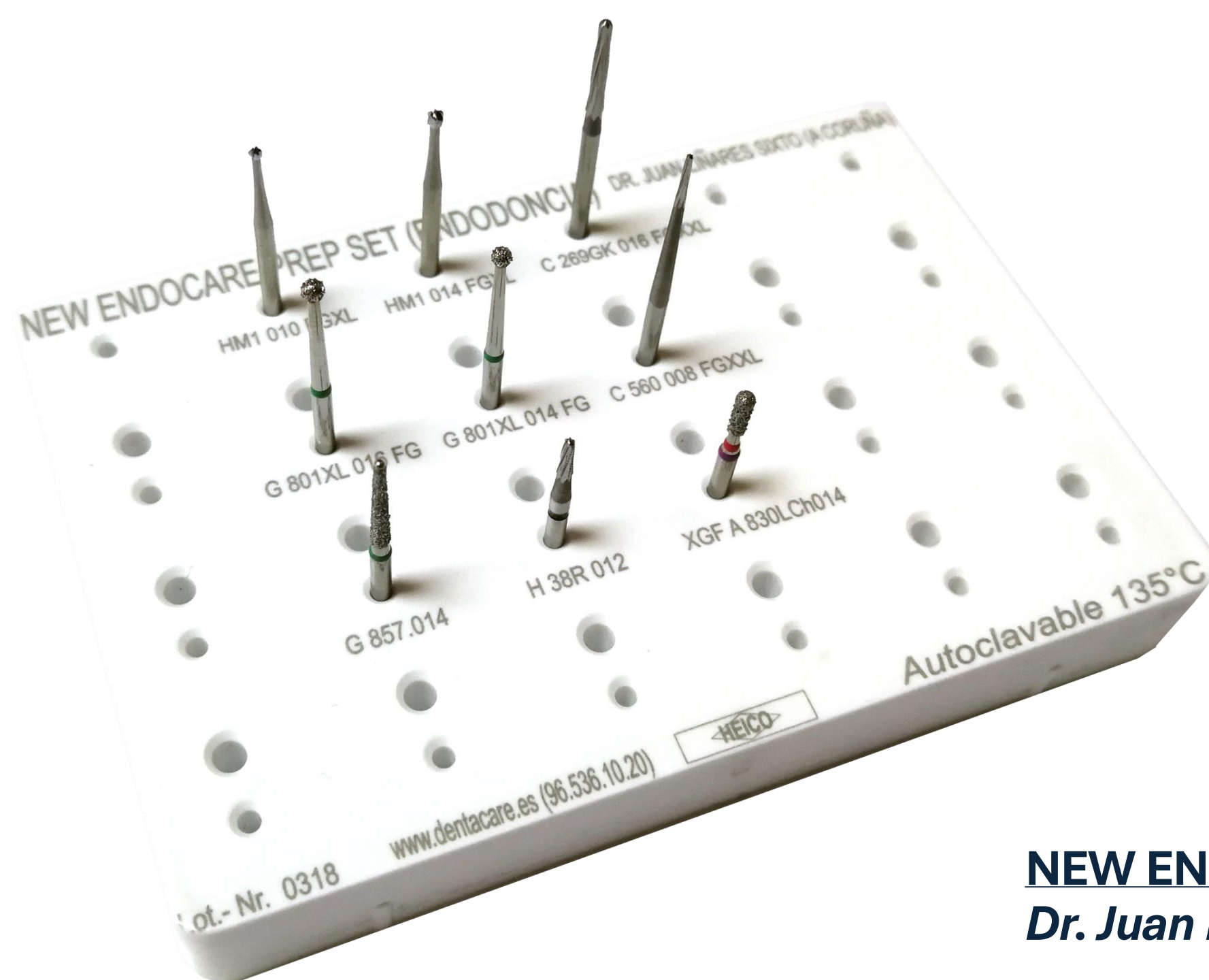

NEW ENDOCARE PREP SET
Dr. Juan Liñares Sixto (A Coruña)

FRESAS DE CARBURO TIPO ROSA



HM1 010 FGXL



HM1 014 FGXL

- Ideales para preparar cavidades y eliminar empastes antiguos.
- También se usan ampliamente en laboratorios dentales en la técnica de colado de modelos, en la producción de modelos, en la tecnología de plásticos o también en la tecnología de coronas y puente.



Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

FRESA PARA LA APERTURA DE LA CÁMARA PULPAR

C269GK


ENDO

↻_{max.} 160.000

📦 3



Fresa optimizada para la apertura en forma de embudo de todas las cámaras pulpares.

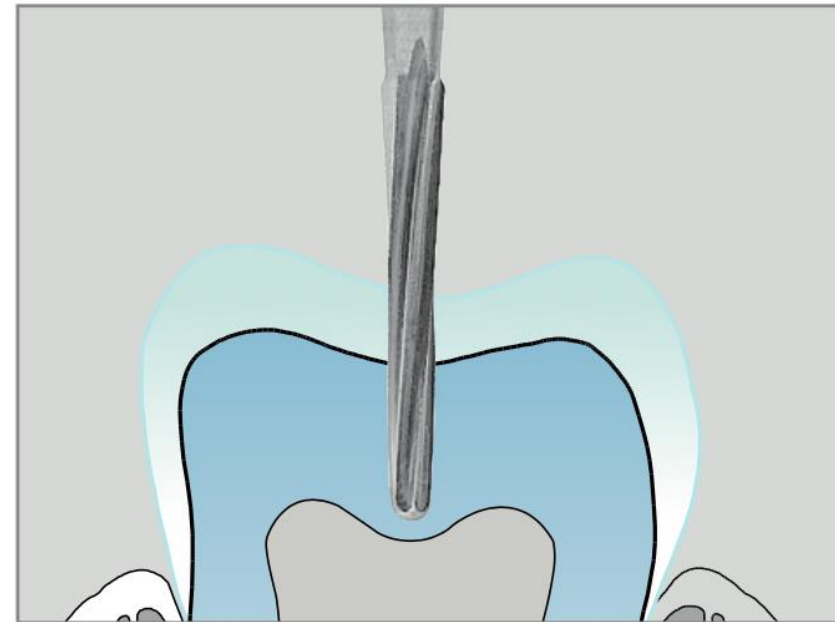

Shank	L mm		
Size		ISO	Order No.
Ø ^{1/10} mm			
FGXL	500 316 219 295...		C269GK.316...
FGXXL	500 317 219 295...		C269GK.317...
			9,0
			016
			016
			016




Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

FRESA LARGA, CÓNICA Y DENTADA



Shank	L mm		9,0
Size	ISO	Order No.	016
Ø ¹ / ₁₀ mm		US No.	
FG	500 314 219 296...	C269GKS.314...	016

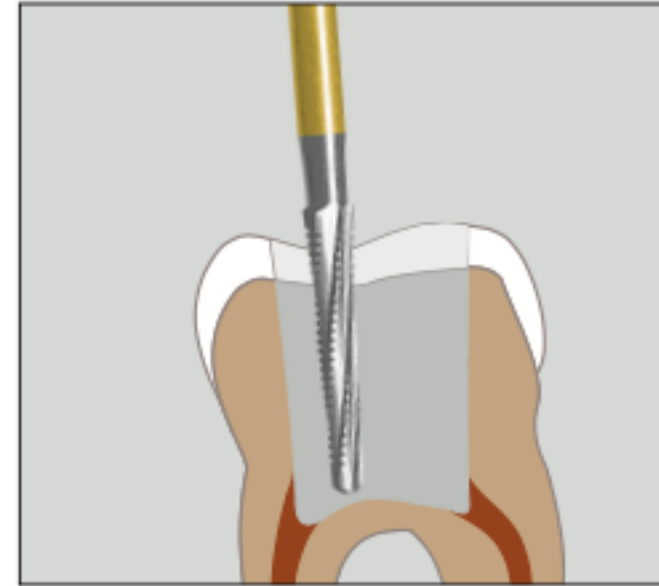

- Tiene una configuración más larga para la abrasión, más cónica y dentado transversal para la realización de un acceso en forma de embudo a la cámara pulpar. El dentado transversal garantiza una abrasión silenciosa y eficaz de la sustancia dental.
- La punta redonda de la fresa, no cortante (terminación segura) evita la penetración en las paredes del canal radicular y en el suelo de la cámara pulpar.
- Usar después de la eliminación del techo de la cámara pulpar con la fresa 802L/857, para ampliar la apertura de acceso y garantizar un tratamiento endodóntico exitoso.


FRESA CON FORMA DE CONO REDONDO PUNTIAGUDA



FG 314
857

Cono redonda, redondo puntiagudo

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	10
ISO	Ø 1/10 mm	014
Order No.		3/5/10
 FG	857.314. ...	014
 FG UF	857.314. ...	
 FG EF	857.314. ...	014
 FG F	857.314. ...	014
 FG G	857.314. ...	014

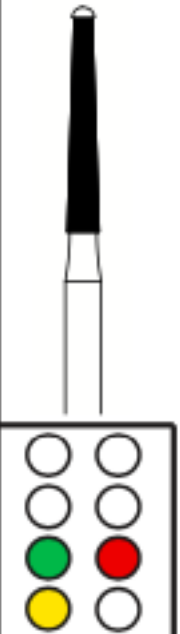


- Fresa de punta inactiva para el ensanchamiento de la apertura de acceso para un tratamiento radicular exitoso.
- Su corte lateral permite conformar las paredes de la cavidad de acceso de forma controlada y segura, reduciendo el riesgo de perforación.



Distribuye:  606997834  965361020

FRESA CON FORMA DE BOLA Y CUELLO EXTRALARGO




FG 316
801XL

Bola, cuello extralargo

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm
ISO Ø 1/10 mm

Order No.

		3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10
○	FG 801XL.316. ...	014	016	018	021	023	029
Ⓜ	FG UF 801XL.316. ...						
●	FG EF 801XL.316. ...	014					
●	FG F 801XL.316. ...	014	016	018	021	023	029
●	FG G 801XL.316. ...	014	016	018	021	023	029
●	FG SG 801XL.316. ...	014	016	018	021	023	029

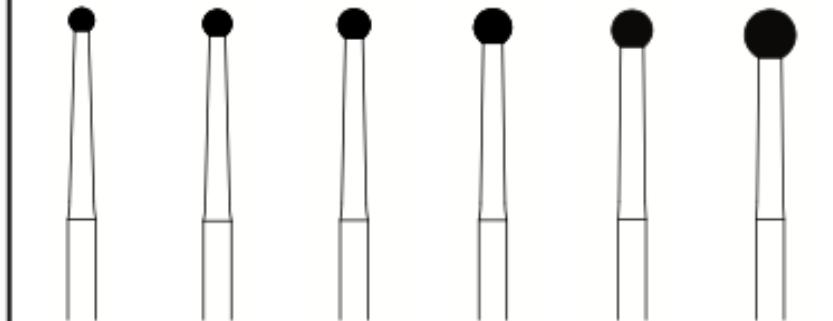

Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

FRESA CON FORMA DE CONO REDONDO PUNTIAGUDA


 								
FG 314								
830L								
Birne lang Pear long Poire, long Pera, largo								
Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm								
ISO Ø 1/10 mm		4	4	5	5	7	7	7
Order No.		012	014	016	018	021	023	025
		3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10
	FG FEF 830LCh.314. ...	012	014	016	018	021	023	025
	FG SGF 830LCh.314. ...	012	014	016	018	021	023	025
	FG XGF 830LCh.314. ...	012	014	016	018	021	023	025





SET MINIMALCARE
Dr. Iñaki Gamborena

SET PICCOLO CAVICARE

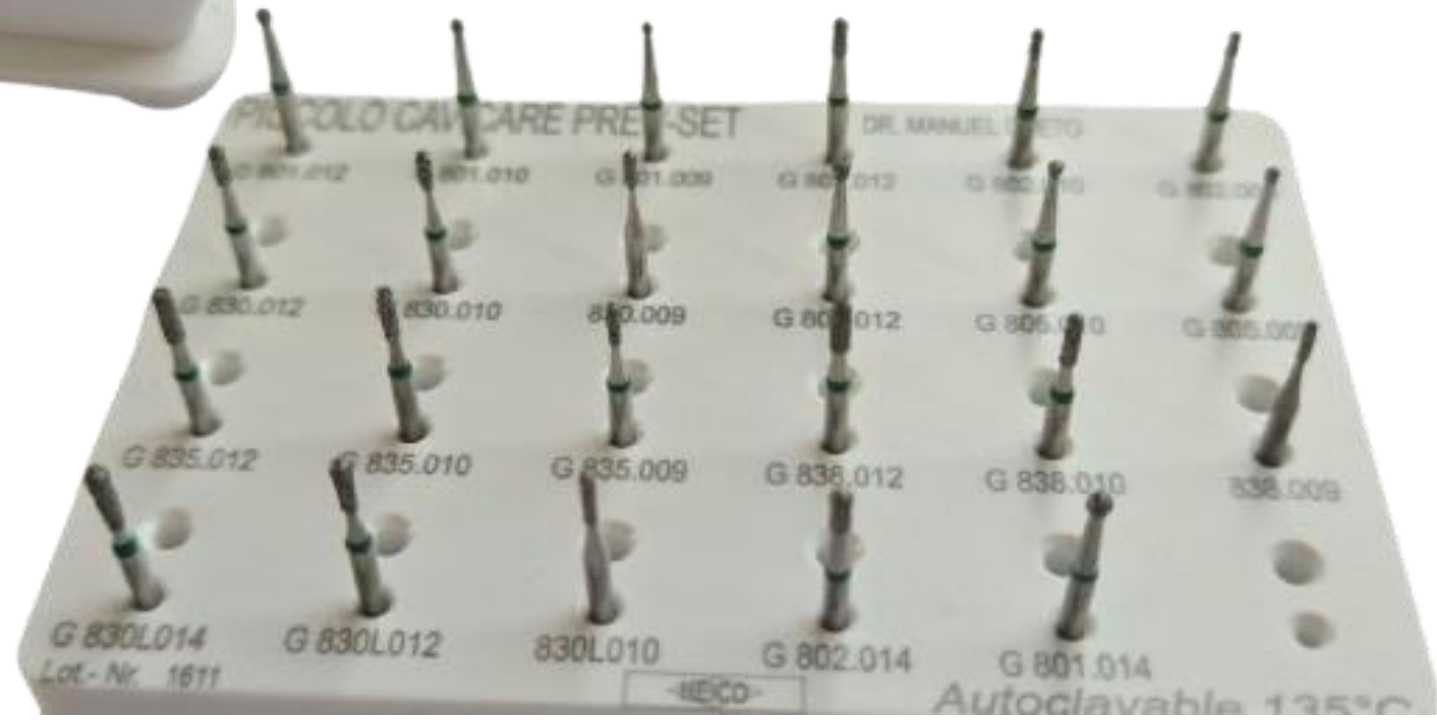




SET MINIPICCOLO
(Mandril corto)



RESTORATIVE CARBIDE
Fresas de carburo de tungsteno

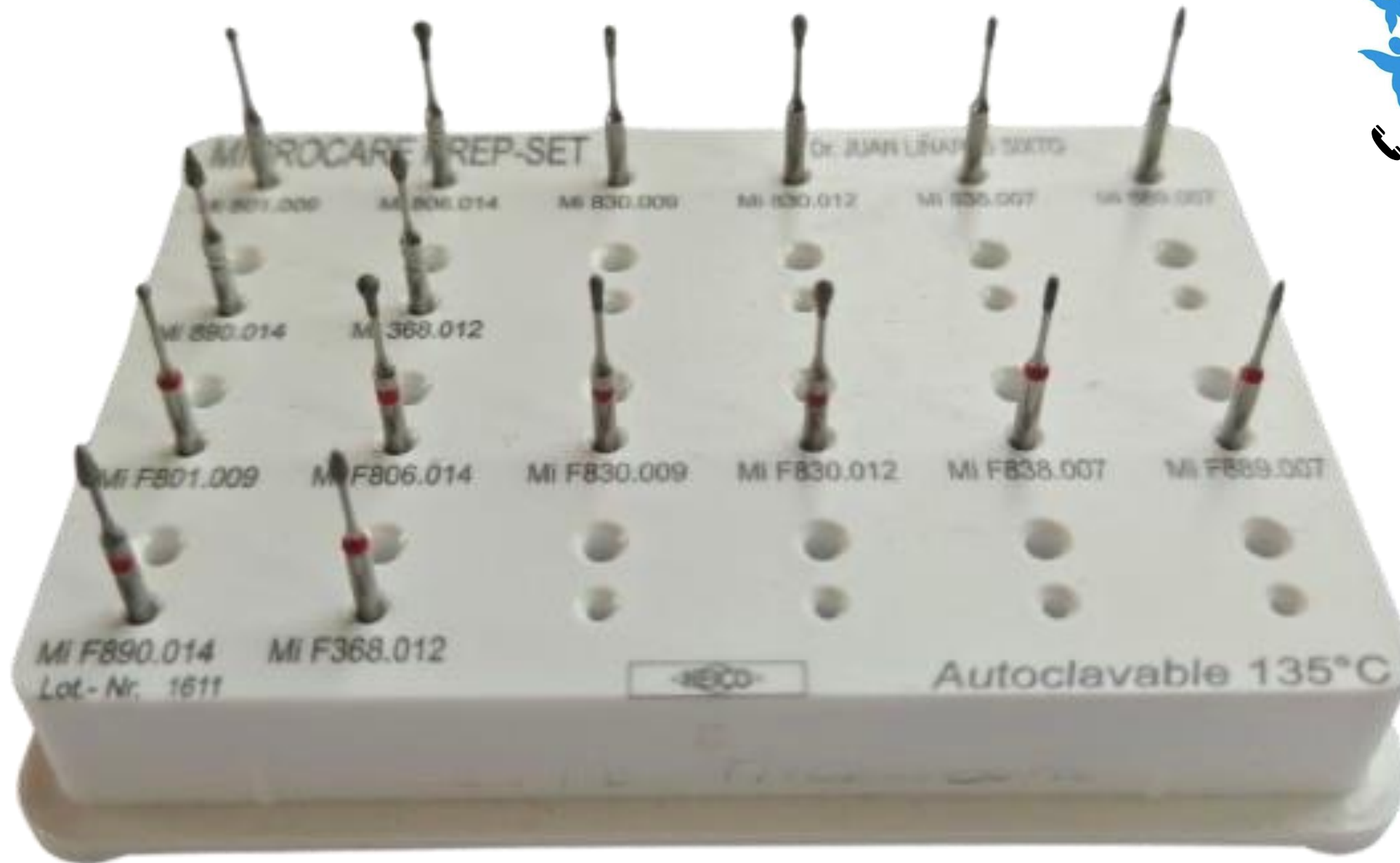

SET MICROCARE

(Cuello super estrechito para ver la cavidad mientras se trabaja)



RESTAURACIÓN

- Distintos kits para CARIES & ESTÉTICA
- KitSCR (remoción de caries)
- KitCPRO (estética)

KIT TRATAMIENTO DE CARIES

- Cavidades cariosas muy profundas en dientes permanentes, especialmente si están cerca de la pulpa dental.
 - Cavidades cariosas en dientes permanentes con ápices abiertos en niños/adolescentes.
 - Cavidades cariosas muy profundas en los dientes temporales (de leche) de bebés/niños.
- Ayuda al odontólogo a realizar **tratamientos antitraumáticos y mínimamente invasivos** de caries profundas.
- Viables incluso **sin anestesia ni turbinas**.
- Ahorro de tiempo** y trabajo más sencillo gracias a un código de colores lógico.
- Más comodidad** para el paciente gracias al diseño ergonómico de los excavadores, que evita la exposición pulpar y permite realizar el procedimiento sin necesidad de instrumentos rotatorios.



SCR Kit | KITSCR + ADEP

In this kit:

- Small rounded excavator *Circle Ex* | EX31L + ADEP RS
- Mushroom-shaped excavator *OddJob Ex* | ART1 + ADEP
- Small drop-shaped excavator *Drop Ex* | EX09 + ADEP BC
- Spatula-burnisher *Restore* | SD1 + ADEP B
- Explorer Sensor | S23H
- Sterilization box | CLEANext B5




Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

TRATAMIENTO DE CARIES



Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

PASO 1

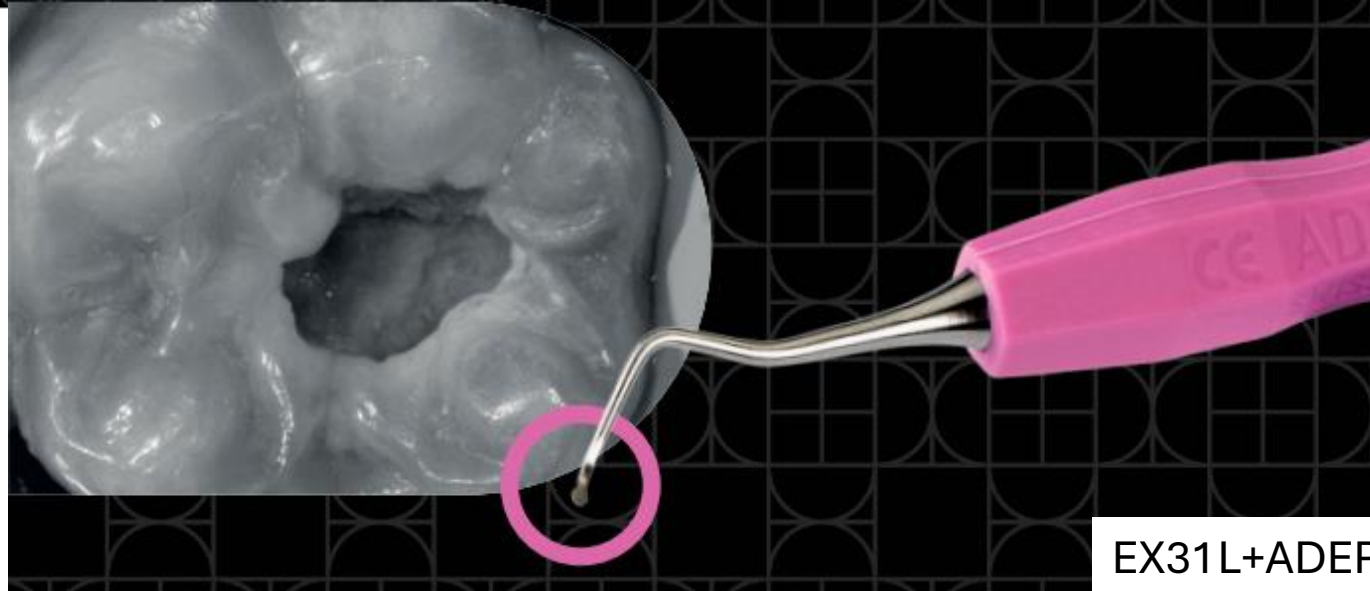

EXCAVADOR REDONDO PEQUEÑO


El tamaño, la forma redondeada y la inclinación ideal hacen que este excavador sea especialmente adecuado para cavidades pequeñas y grandes, especialmente en los molares.

TRATAMIENTO DE CARIES



Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020


PASO 1

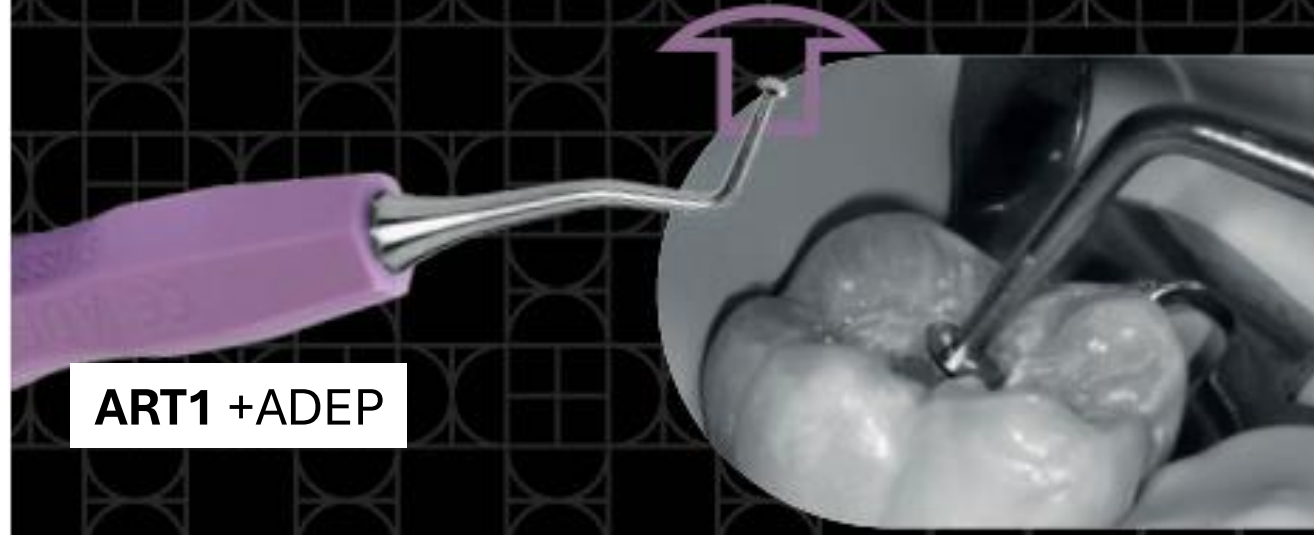

ELIMINACIÓN DE DENTINA INFECTADA HASTA EL FONDO DE LA CAVIDAD SIN EXPONER LA PULPA

- Explorador con forma de champiñón **única e innovadora**
- Con solo 1 instrumento => Permite excavar la dentina infectada en las paredes axiales mediante un movimiento continuo a lo largo de **toda la circunferencia interna de la cavidad**, sin necesidad de cambiar la inclinación del instrumento.



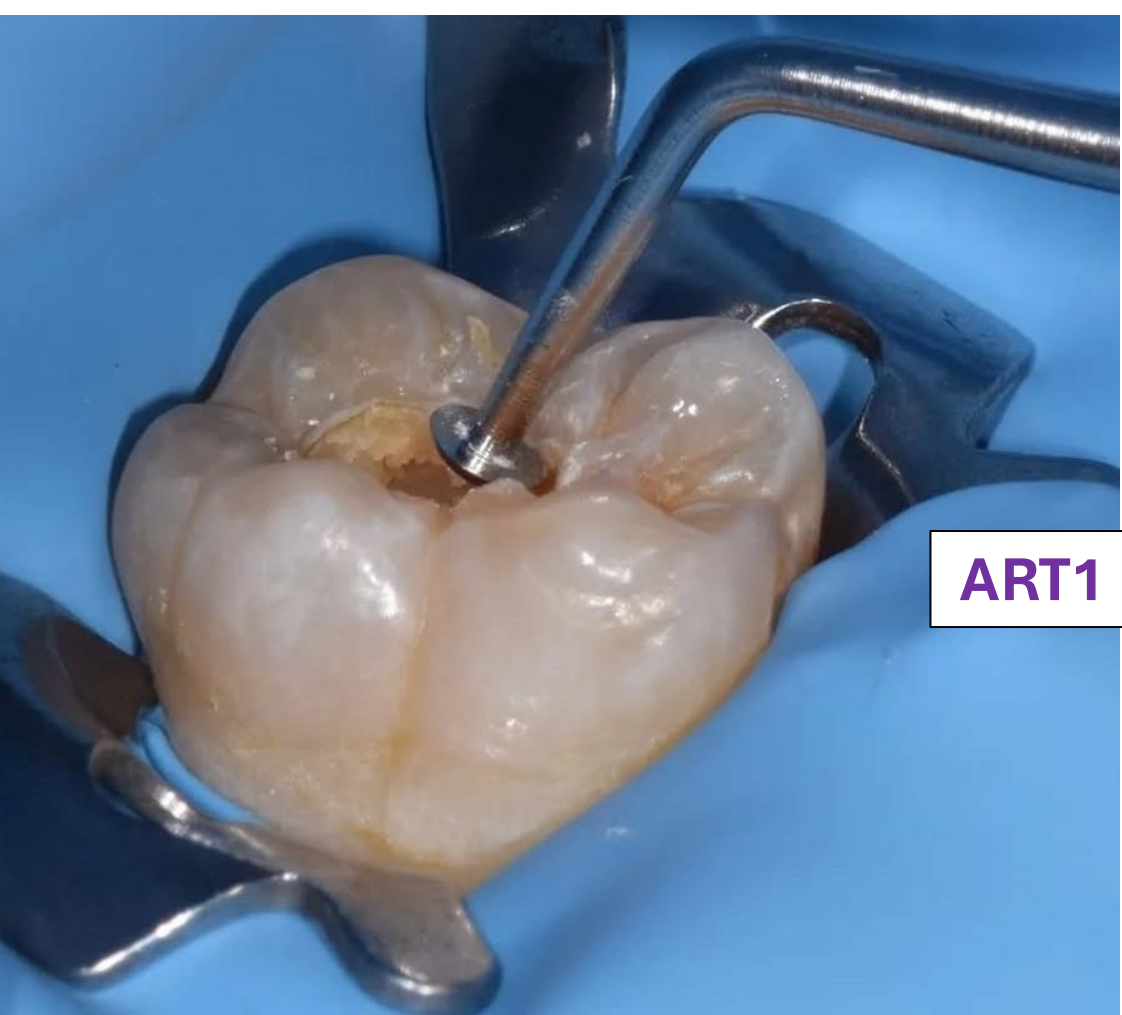

ART1 +ADEP



-Especialmente útil en odontología pediátrica, donde preservar los dientes temporales hasta su exfoliación natural es fundamental para mantener la función y guiar la erupción de los dientes permanentes.

-Su alta sensibilidad táctil, filo y diseño ergonómico facilitan un trabajo preciso, rápido y

TRATAMIENTO DE CARIES




Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

EX09+ADEP

(Excavador pequeño en
forma de gota de agua)

PASO 1

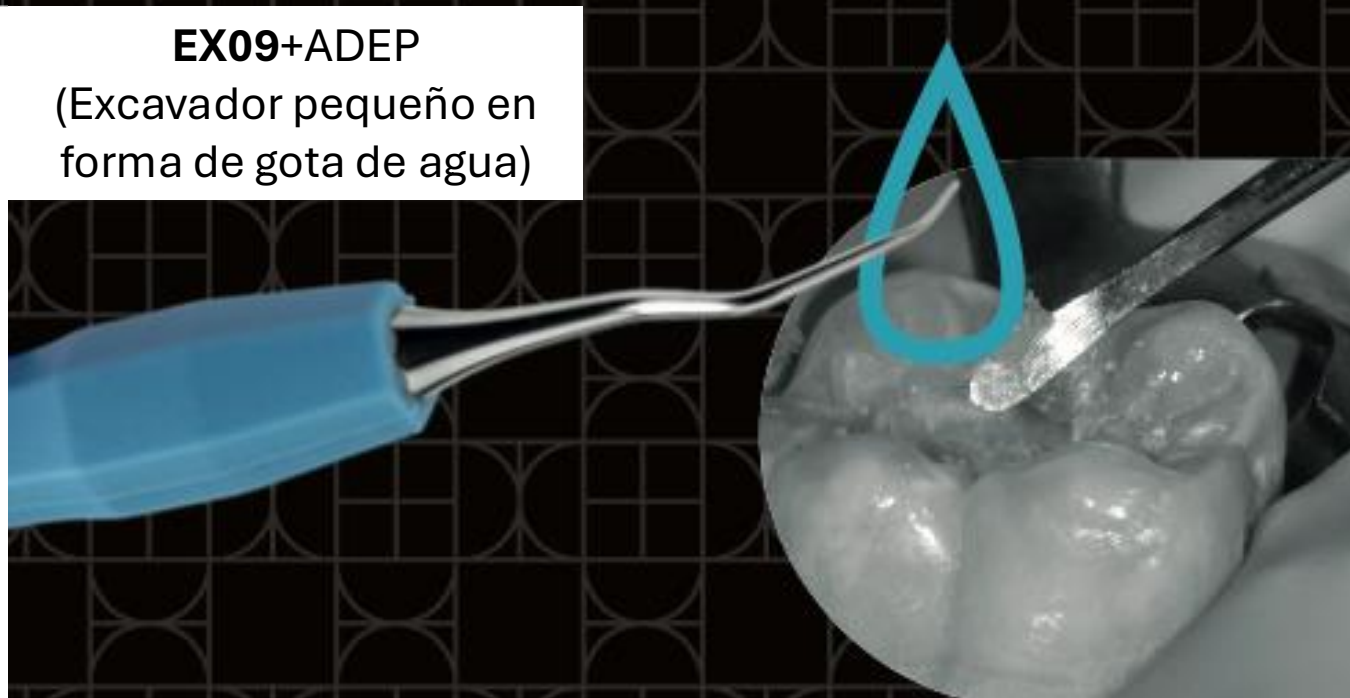

EXCAVADOR PEQUEÑO EN FORMA DE GOTA DE AGUA


La pequeña forma de gota de agua favorece la eliminación completa de la dentina afectada en las zonas de difícil acceso, en particular en la unión dentino-esmalte (DEJ) y en el escalón cervical (CEJ).

TRATAMIENTO DE CARIES



Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

PASO 2

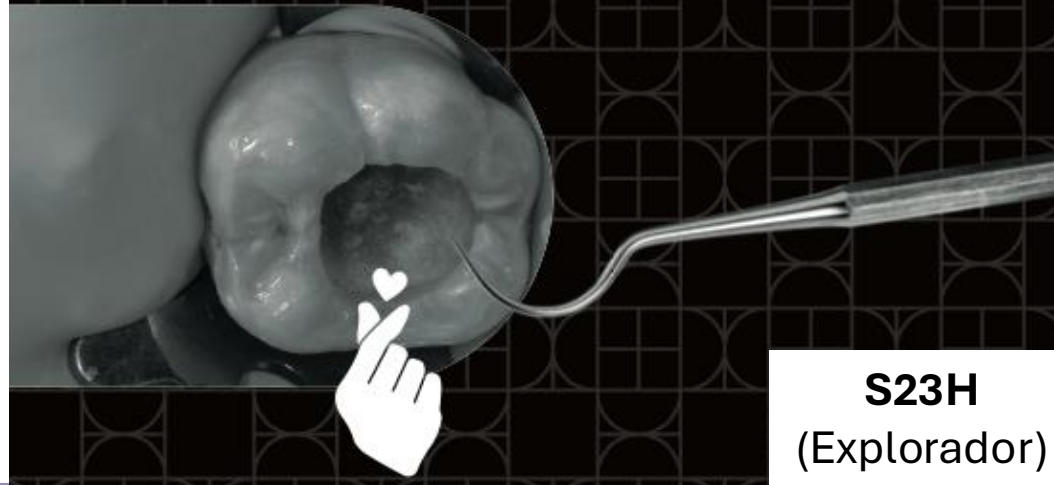

S23H
(Explorador)

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE LA CAVIDAD:


El explorador con una curva amplia y una punta muy afilada permite una evaluación fiable de la consistencia de la dentina.

TRATAMIENTO DE CARIES



Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

PASO 3

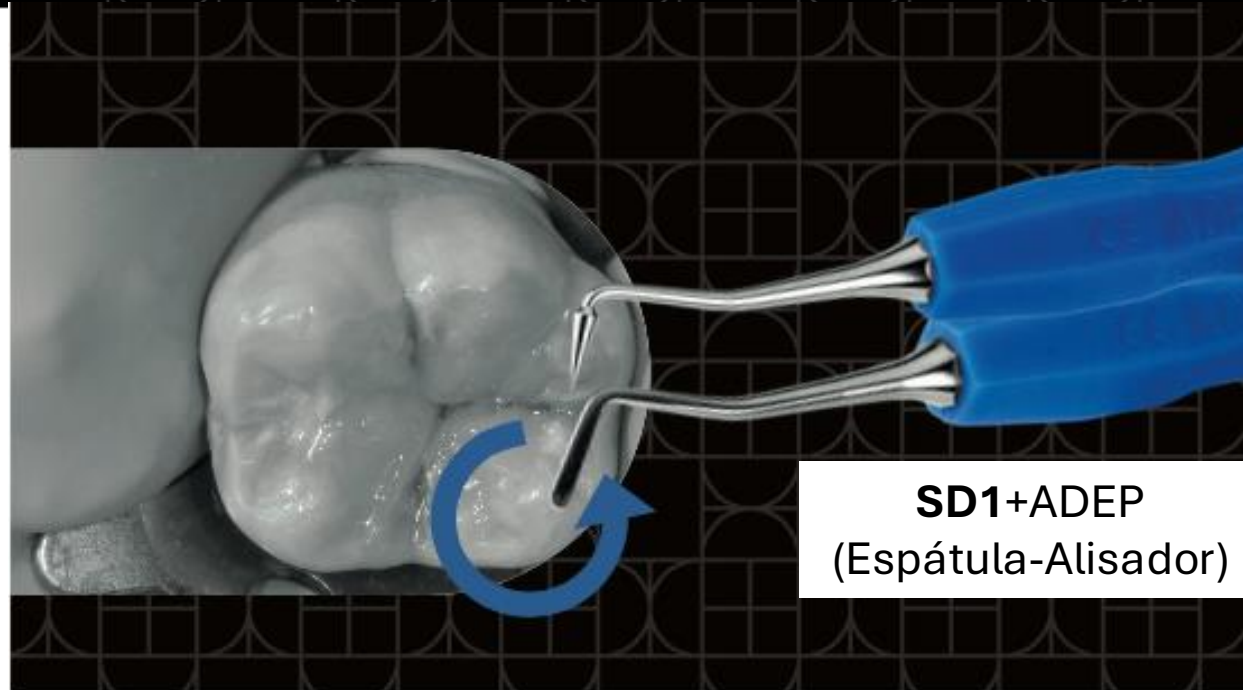


SD1+ADEP
(Espátula-Alisador)

RESTAURACIÓN CON APLICACIÓN Y MODELADO DE COMPOSITE:

Instrumento de doble uso con una espátula larga y delgada para aplicar y estratificar el material restaurador, y una punta cónica para un modelado oclusal muy fluido y preciso, incluso de los detalles anatómicos más pequeños.

EXCAVADORES EN FORMA DE GOTA DE AGUA

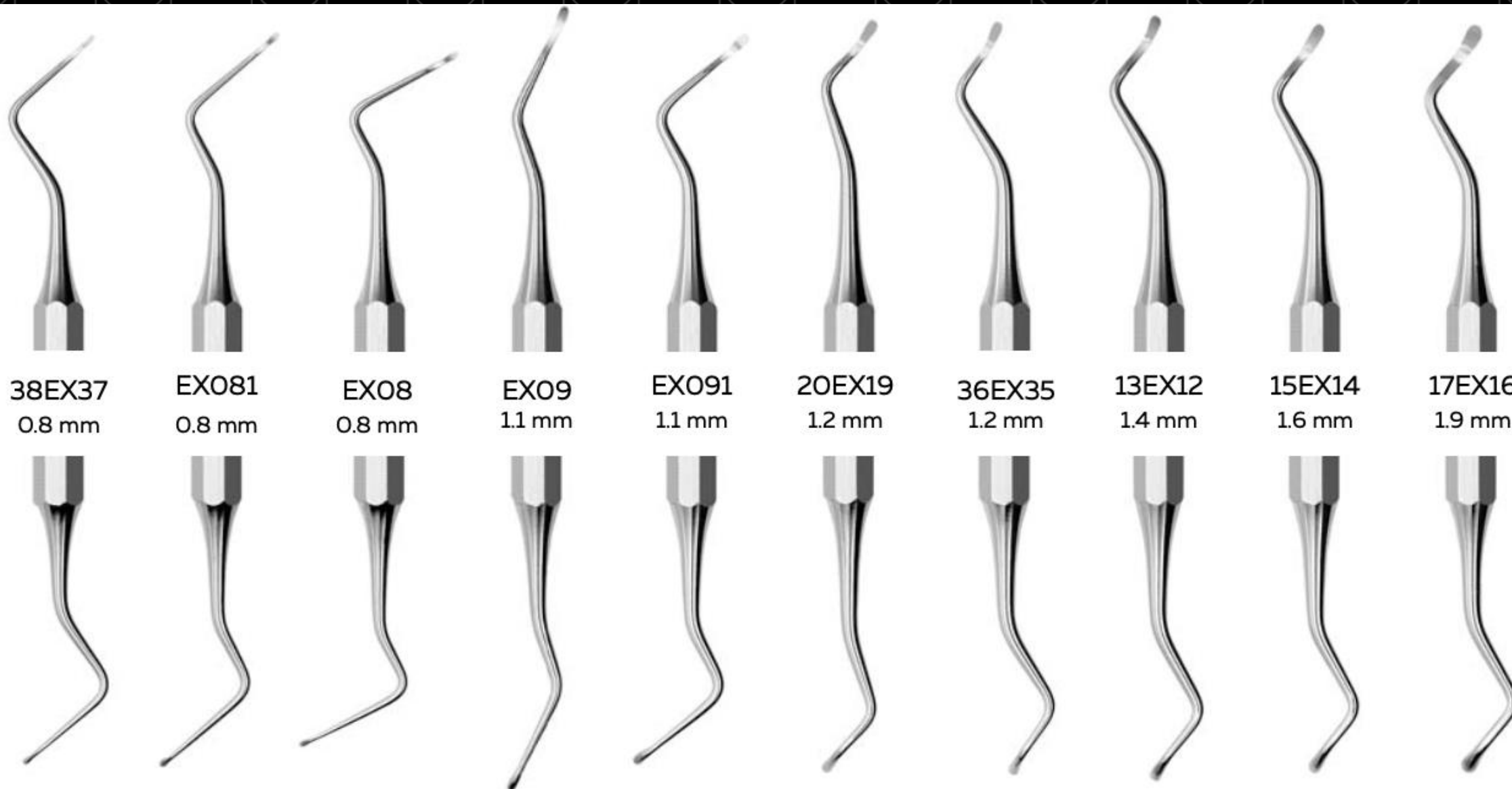

EXCAVADORES CON FORMA CILÍNDRICA



EX182+ADEP VC
ø 1.2 mm



EX18+ADEP VC
ø 1.4 mm



EX31L+ADEP VC
ø 1.0 mm



EX32L+ADEP VC
ø 1.5 mm



EX33L+ADEP VC
ø 2.0 mm



KIT CPRO



Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020



**-NO SE ADHIERE
EL COMPOSITE-**

- Solo **5 instrumentos** para hacer restauración estética de toda la boca
- Cada instrumental está diseñado para esculpir, estratificar y refinar de forma eficiente, logrando resultados naturales y estéticos
- 3 acabados: **Acero, Shadeline®** y **Nitruro de titano**



CPRO1C+ADEP - CPRO2C+ADEP

Espátula y condensador plano
redondeado, pequeño (1) y grande (2)



CPRO3C+ADEP

Modelador



CPRO4C+ADEP - CPRO5C+ADEP

Espátulas flexibles y afiladas



COMPro composite kit | KITCPROC+ADEP

CPRO1C+ADEP J
CPRO2C+ADEP R
CPRO3C+ADEP V
CPRO4C+ADEP B
CPRO5C+ADEP N
CLEANext B5 (p. 63)



**-NO SE ADHIERE
EL COMPOSITE-**



Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

Reciba su pedido en tan solo 24h