




“Tu empresa de confianza, con más de 35 años de experiencia en el sector”

Reciba su pedido en tan solo 24h:  606997834  965361020

PACK OFERTA ESPECIAL



Contraángulo EVA
+
Pack 7 limas
colores a elegir
=
650 €

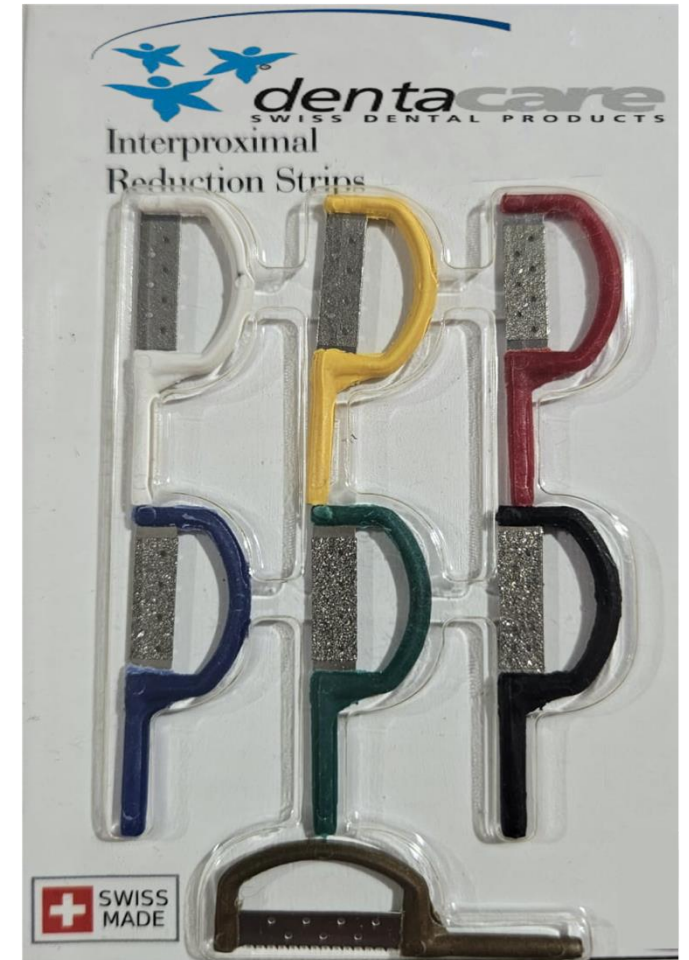

NUEVO CONTRAÁNGULO COMPLEX W&H



Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020



¡POTENCIA, PRECISIÓN Y CONFORT EN CADA MOVIMIENTO!


- ◆ **Sistema de amortiguación sónica:** reduce al mínimo la vibración, brindando mayor confort al paciente y mejor control al profesional.
- ◆ **Refrigeración por agua:** trabaja con máxima seguridad, evitando el sobrecalentamiento y protegiendo los tejidos dentales.
- ◆ **Alta velocidad de rotación (20.000 r.p.m.):** eficiencia óptima para procedimientos de *stripping*, contorneado y pulido interproximal.
- ◆ **Precisión en desgastes de hasta 14 mm por arcada** usando las limas de diamante natural, ideal para **evitar extracciones en casos de apiñamiento severo.**

SET DE LIMAS DE STRIPPING DE DIAMANTE NATURAL

(Pueden elegir la combinación de los 7 colores que más utilicen)



Desgaste conseguido: Grosor Lima:

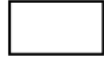	XX FINO	0,140 mm.	➔	15 µm
	X FINO	0,160 mm.	➔	25 µm
	FINO	0,270 mm.	➔	40 µm
	MEDIO	0,330 mm.	➔	60 µm
	GRUESO	0,370 mm.	➔	90 µm
	X GRUESO	0,490 mm.	➔	120 µm
	LIMA PARA ROMPER EL PUNTO DE CONTACTO			

CARACTERÍSTICAS:

- 1º **No cortan ni lesionan** tejidos blandos (encía, lengua, labios).
- 2º Nuevos materiales de última generación **titanio-teflón y diamante natural**.
- 3º Limas **sin soldaduras, irrompibles de una sola pieza**, mayor **duración** y calidad del producto. Aguantan más de **2,5 Newton** de presión al flexionar y pulir.
- 4º Limas **perforadas para el desalojo del material desgastado** y mejora el pulido, **no genera calor** y aumenta la flexibilidad de la lima, adaptables a cualquier espacio bucal.
- 5º Limas por las **2 caras diamantadas** y opcional por **1 sola cara**.

GALGAS DE MEDICIÓN



Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020



**Desde 0.10 mm
Hasta 0.50 mm**



SWITZERLAND AG



Casa suiza que inventó las fresas de diamante en 1947

**ARTESANÍA,
CALIDAD y
PRECISIÓN
SUIZA**



**LA EXCELENCIA
ESTÉTICA EN
ORTODONCIA**



Foto cedida por Iñaki Gamborena

ANILLO VERDE			GRUESO (G)	126µm - 151µm	Tallado
SIN ANILLO			MEDIO	91µm - 107µm	Rectificado universal
ANILLO ROJO			FINO (F)	46µm	Rectificado y alisado fino
ANILLO AMARILLO			EXTRAFINO (EF)	15µm	Preacabado y pulido
ANILLO BLANCO			ULTRAFINO (UF)	10µm	Acabado y pulido final

-Heico con **80 años de experiencia** en técnicas de recubrimiento diamantado ofrece una clara ventaja sobre la competencia:

-Solo utiliza **granos de DIAMANTE NATURAL** finamente seleccionados, que tienen **mucho más filo** que los granos sintéticos o mixtos.

-Esto se traduce en un **mejor rendimiento de corte**.




dentacare
SWISS DENTAL PRODUCTS

Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

FRESAS DE DIAMANTE NATURAL EN –FG- ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA LA EXCELENCIA EN ORTODONCIA

Vienen en cajitas de **5 unidades**


FRESAS OVOIDE (TIPO GRANADA)

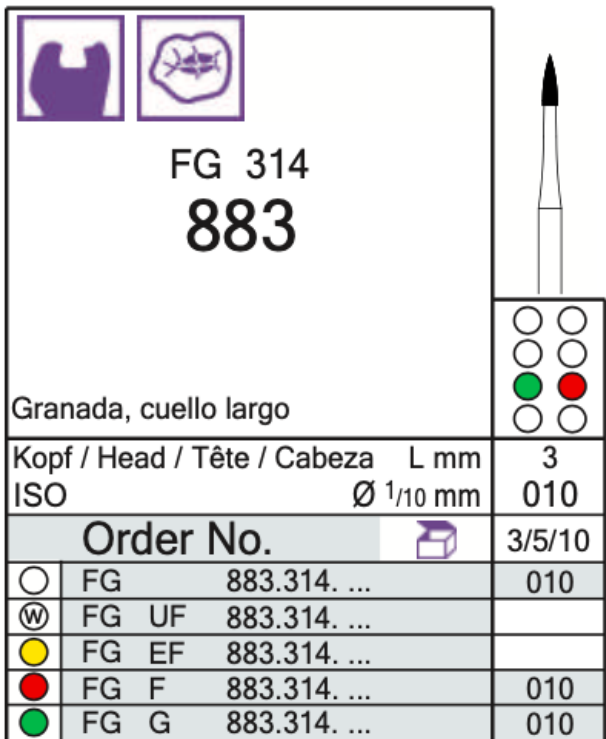

 		 	
FG 314 889			
Granada, cuello extra largo			
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	3.5	4.5
ISO	Ø 1/10 mm	008	010
Order No.		3/5/10	3/5/10
	FG 889.314. ...	008	010
	FG UF 889.314. ...	008	010
	FG EF 889.314. ...	008	010
	FG F 889.314. ...	008	010
	FG G 889.314. ...	008	010
	FG SG 889.314. ...	008	




 			
FG 314 888			
Granada, largo			
Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm	
ISO		Ø 1/10 mm	
Order No.		3/5/10	
	FG	888.314. ...	012
	FG UF	888.314. ...	
	FG EF	888.314. ...	012
	FG F	888.314. ...	012
	FG G	888.314. ...	012
	FG SG	888.314. ...	012

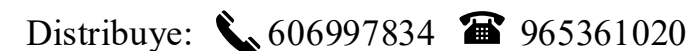

FRESAS TIPO LLAMA



FG 314
860

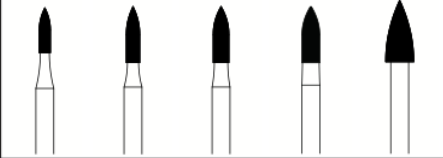


Llama, corta

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm					
ISO	Ø 1/10 mm	4	5	5	5	6
		010	012	014	016	025
Order No.		3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10
○ FG	860.314. ...	010	012	014	016	025
⊗ FG UF	860.314. ...	010				025
● FG EF	860.314. ...	010	012	014	016	025
● FG F	860.314. ...	010	012	014	016	025
● FG G	860.314. ...	010	012	014	016	025
● FG SG	860.314. ...	010	012	014	016	025
● FG UG	860.314. ...	010	012	014	016	025



FG 314
863

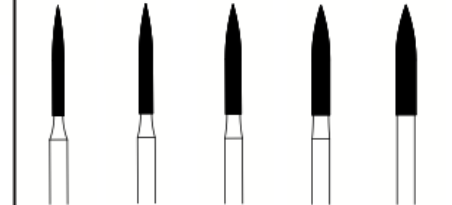


Llama, cabeza larga

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm					
ISO	Ø 1/10 mm	10	10	10	10	10
		010	012	014	016	018
Order No.		3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10
○ FG	863.314. ...	010	012	014	016	018
⊗ FG UF	863.314. ...		012		016	018
● FG EF	863.314. ...	010	012	014	016	018
● FG F	863.314. ...	010	012	014	016	018
● FG G	863.314. ...	010	012	014	016	018
● FG SG	863.314. ...		012	014	016	018
● FG UG	863.314. ...		012	014	016	
● FG XG	863.314. ...			014		



FG 314
862

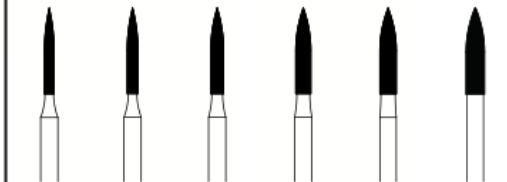

Llama

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm					
ISO	Ø 1/10 mm	8	8	8	8	8
		008	010	012	014	018
Order No.		3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10
○ FG	862.314. ...	008	010	012	014	018
⊗ FG UF	862.314. ...		010	012	014	
● FG EF	862.314. ...		010	012	014	018
● FG F	862.314. ...	008	010	012	014	018
● FG G	862.314. ...		010	012	014	018
● FG SG	862.314. ...		010	012	014	018
● FG UG	862.314. ...			012	014	018
● FG XG	862.314. ...			012	016	




Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

FRESAS PUNTIAGUDAS Y CURVADAS



**FG 314
392**

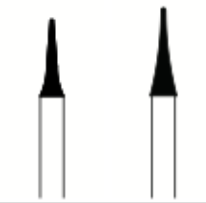


Puntiagudo, curvado

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	5	6
ISO	Ø 1/10 mm	016	018
Order No.		3/5/10	3/5/10
○ FG	392.314. ...	016	018
Ⓜ FG UF	392.314. ...		
● FG EF	392.314. ...	016	018
● FG F	392.314. ...	016	018




**FG 314
832**






Puntiagudo, curvado

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	2.7
ISO	Ø 1/10 mm	027
Order No.		3/5/10
○ FG	832.314. ...	027
Ⓜ FG UF	832.314. ...	
● FG EF	832.314. ...	027
● FG F	832.314. ...	027



**FG 314
833**

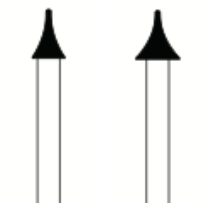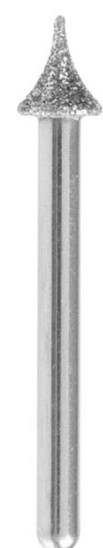Puntiagudo, curvado

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	3.5	3.5
ISO	Ø 1/10 mm	023	031
Order No.		3/5/10	3/5/10
○ FG	833.314. ...	023	031
Ⓜ FG UF	833.314. ...		
● FG EF	833.314. ...	023	031
● FG F	833.314. ...	023	031



Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020


FRESAS TIPO AGUJA PUNTIAGUDAS



**FG 314
852**

Aguja puntiaguda, cabeza corta

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	4	6
ISO	Ø 1/10 mm	010	012
Order No.		3/5/10	3/5/10
○ FG 852.314. ...		010	012
Ⓜ FG UF 852.314. ...		010	012
● FG EF 852.314. ...		010	012
● FG F 852.314. ...		010	012
● FG G 852.314. ...		010	012
● FG SG 852.314. ...			012

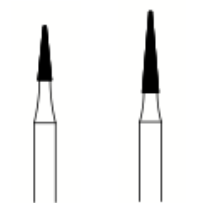



**FG 314
853**

Aguja puntiaguda, cabeza corta, cuello largo

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	3
ISO	Ø 1/10 mm	008
Order No.		3/5/10
○ FG 853.314. ...		008
Ⓜ FG UF 853.314. ...		008
● FG EF 853.314. ...		008
● FG F 853.314. ...		008








**FG 314
859L**



Aguja puntiaguda, cabeza larga

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	11	11
ISO	Ø 1/10 mm	010	012
Order No.		3/5/10	3/5/10
○ FG 859L.314. ...		010	012
Ⓜ FG UF 859L.314. ...			
● FG EF 859L.314. ...			
● FG F 859L.314. ...		010	012
● FG G 859L.314. ...		010	012

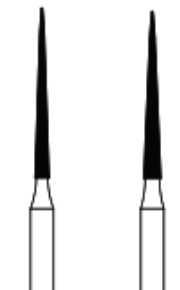


FRESAS AGUJA PUNTIAGUDAS

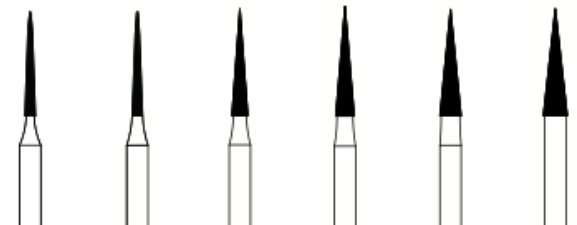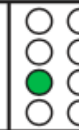 									
FG 314 858									
Aguja puntiaguda									
Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm ISO Ø 1/10 mm		8 008	8 010	8 012	8 014	8 016	8 018		
Order No.		3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10		
	FG 858.314. ...	008	010	012	014	016	018		
	FG UF 858.314. ...	008	010		014				
	FG EF 858.314. ...	008	010	012	014	016			
	FG F 858.314. ...	008	010	012	014	016			
	FG G 858.314. ...	008	010	012	014	016	018		
	FG SG 858.314. ...				014				

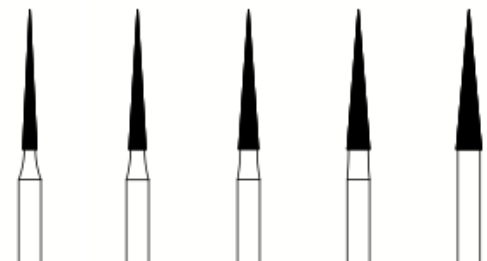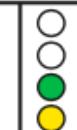
 								
FG 314 859								
Aguja puntiaguda, cabeza larga								
Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm ISO Ø 1/10 mm		10 010	10 012	10 014	10 016	10 018		
Order No.		3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10		
	FG 859.314. ...	010	012	014	016	018		
	FG UF 859.314. ...		012		016	018		
	FG EF 859.314. ...	010	012	014	016	018		
	FG F 859.314. ...	010	012	014	016	018		
	FG G 859.314. ...	010	012	014	016	018		
	FG SG 859.314. ...	010	012	014	016	018		

FRESAS TIPO BROTE

 		FG 314 368					
Brote							
Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm		3.5	4	4.5	5
ISO		Ø 1/10 mm		016	018	021	023
Order No.				3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10
○	FG	368.314. ...		016	018	021	023
⊗	FG UF	368.314. ...		016		021	023
●	FG EF	368.314. ...		016	018	021	023
●	FG F	368.314. ...		016	018	021	023
●	FG G	368.314. ...		016	018	021	023
●	FG SG	368.314. ...		016	018	021	023
●	FG UG	368.314. ...		016	018	021	023
●	FG XG	368.314. ...			018	021	023



FRESA TIPO OCLUSAL

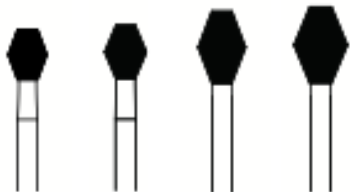		FG 314 811					
Fresa oclusal							
Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm		4	4.5	6	6.5
ISO		Ø 1/10 mm		031	033	040	042
Order No.				3/5/10	3/5	3/5	3/5
○	FG	811.314. ...		031		040	
⊗	FG UF	811.314. ...					
●	FG EF	811.314. ...					
●	FG F	811.314. ...					
●	FG G	811.314. ...		031		040	
●	FG SG	811.314. ...		031			
●	FG UG	811.314. ...		031		040	
●	FG XG	811.314. ...			033		042



FRESA TIPO RUEDA

		FG 314 909				
Rueda						
Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm		1	1.7	2.2
ISO		Ø 1/10 mm		033	040	050
Order No.				3/5	3/5	3/5
○	FG	909.314. ...		033	040	050
⊗	FG UF	909.314. ...				
●	FG EF	909.314. ...			040	
●	FG F	909.314. ...		033	040	
●	FG G	909.314. ...		033	040	
●	FG SG	909.314. ...			040	
●	FG UG	909.314. ...				
●	FG XG	909.314. ...				



Distribuye: 606997834 965361020


FRESA DE CERÁMICA ESPECIAL PARA TEJIDOS BLANDOS

~ 1 FRESA PARA TODA LA VIDA~

Para dientes **retenidos**, **alargamiento coronario** y **modelado de la encía**.
Va cauterizando a la vez que separando el tejido **sin generar calor** por lo que se evita la necrosis.
Sin necesidad de agua.



L (mm)

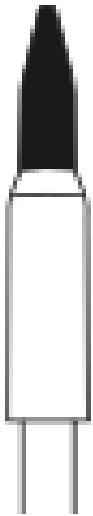

5,0



Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020


FRESAS DE CARBURO DE TUNGSTENO PARA QUITAR LOS RESTOS DE CEMENTO DE LOS BRACKETS



HM23R



C22

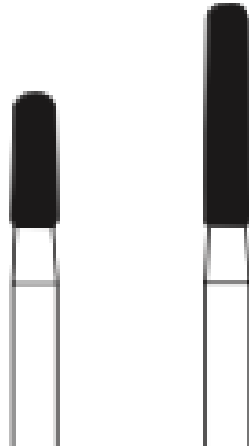

5	8
016	016
↻ _{max.} FG / FGL 300.000	

C22AGK C22ALGK



Punta lisa, no activa (GK) para proteger la encía.



Bisel de seguridad para evitar las rayaduras sobre el esmalte.

Al tener el revestimiento especial de TiN evita el atasco de las hojas del instrumento durante el trabajo.

PASOS A SEGUIR PARA QUITAR LOS RESTOS DE CEMENTO DE LOS BRACKETS

PASO 1

Retira casi todos los restos de cemento hasta que quede un poquito para no rayar el esmalte



HM23R



C22

PASO 2

Con el pulidor amarillo quita todos los restos de cemento y pule para alisar y dejar el 1º brillo



PASO 3

Finaliza con el pulidor azul para dejar un altísimo brillo en el esmalte sin necesidad de pasta



FRESAS DE CARBURO DE TUNGSTENO TIPO OVOIDE

TC379



Ovale • Ovoide • Ovíide


• 12 lame • filos • lâminas

• 20 lame • filos • lâminas

• 30 lame • filos • lâminas

↻ FG 300.000, RA 100.000

📦 5

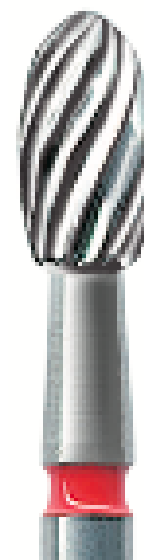

Shank	L mm		4,2
Size	ISO		023
Ø ¹ / ₁₀ mm	Order No.		
FG	• 500 314 277 072...	TC379.314...	023



dentacare
SWISS DENTAL PRODUCTS

Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020



DISCOS PARA HACER STRIPPING DISPONIBLES en RA o HP

Venta unitaria



DISCOS DIAMANTADOS PERFORADOS PARA UNA EXCELENTE VISIBILIDAD



RECOMENDADO POR EL FABRICANTE

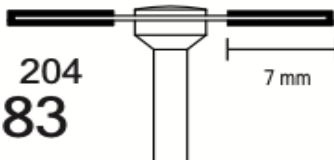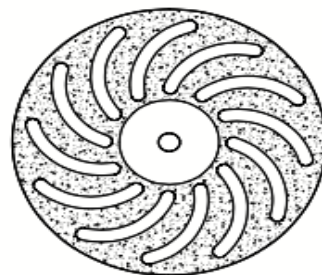 RA 204 983 SUPERFLEX		 ● = 65μ ● = 46μ ○ = ○ =
Discs : Dicke / Thicknes / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain μ ISO Ø 1/10 mm		0.15 / 0.20 220
Order No.		1
○	RA 983.204. ...	
●	RA EF 983.204. ...	
●	RA F 983.204. ...	220
●	RA G 983.204. ...	220

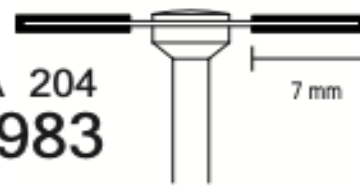
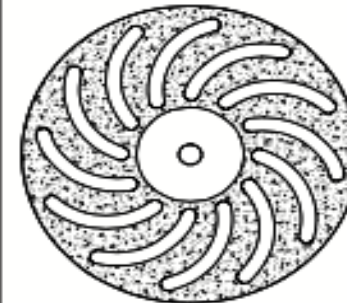


 RA 204 X983 ULTRAFLEX		 ○ = ○ = ○ = ○ = ○ = ● = 30μ
Discs : Dicke / Thicknes / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain μ ISO Ø 1/10 mm		0.15 220
Order No.		1
○	RA X983.204. ...	
●	RA EF X983.204. ...	220

DISCOS DIAMANTADOS PERFORADOS PARA UNA EXCELENTE VISIBILIDAD



RA 204
933

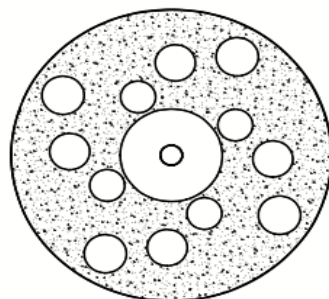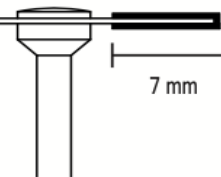

○ =
● = 46μ ○ = ○ =

SUPERFLEX

Discs : Dicke / Thicknes / Épaisseur mm
Korngröße / Grit size / Taille du grain μ
ISO Ø 1/10 mm



0.20
220

Order No.	
○ RA 932.204. ...	
● RA EF 932.204. ...	
● RA F 932.204. ...	220

RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE



RA 204
932

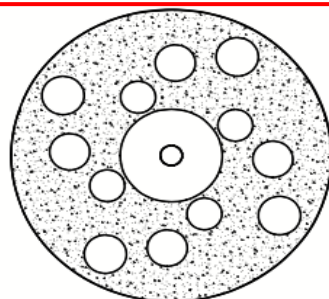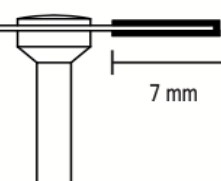

○ =
● = 46μ ○ = ○ =

SUPERFLEX

Discs : Dicke / Thicknes / Épaisseur mm
Korngröße / Grit size / Taille du grain μ
ISO Ø 1/10 mm

0.20
220

Order No.	
○ RA 932.204. ...	
● RA EF 932.204. ...	
● RA F 932.204. ...	220



1 CARA DIAMANTADA



2 CARAS DIAMANTADAS



RA 204
X933

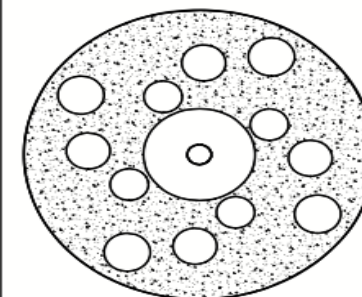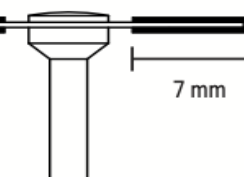

○ = ○ = ○ =
○ = ○ = ● = 30μ

ULTRAFLEX



Discs : Dicke / Thicknes / Épaisseur mm
Korngröße / Grit size / Taille du grain μ
ISO Ø 1/10 mm

0.15
220

Order No.	
○ RA X932.204. ...	
● RA EF X932.204. ...	220



RA 204
X932

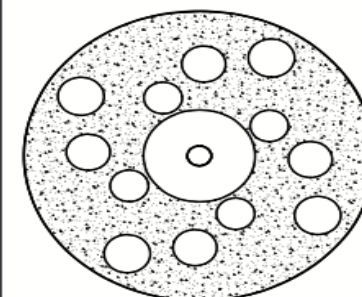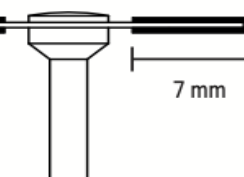

○ = ○ = ○ =
○ = ○ = ● = 30μ


ULTRAFLEX

Discs : Dicke / Thicknes / Épaisseur mm
Korngröße / Grit size / Taille du grain μ
ISO Ø 1/10 mm


0.15
220

Order No.	
○ RA X932.204. ...	
● RA EF X932.204. ...	220

DISCOS DIAMANTADOS PERFORADOS PARA UNA EXCELENTE VISIBILIDAD

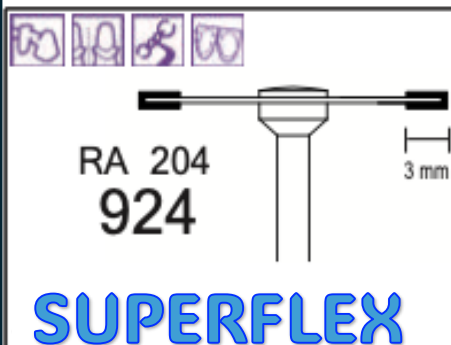

○= ○=46μ ○=	○= ○=46μ ○=	○= ○=46μ ○=	○= ○=46μ ○=
0.20 140	0.20 160	0.20 190	0.20 220
1	1	1	1
140	160	190	220



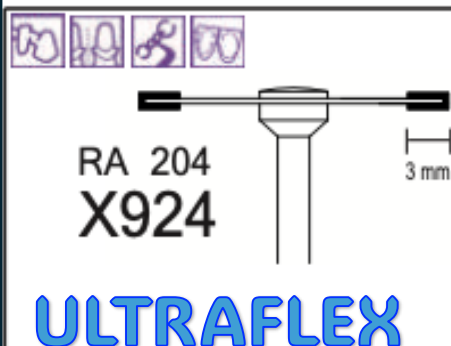


○= ○=30μ ○=	○= ○=30μ ○=	○= ○=30μ ○=	○= ○=30μ ○=
0.20 140	0.20 160	0.20 190	0.20 220
1	1	1	1
140	160	190	220







DISCOS DIAMANTADOS PERFORADOS PARA UNA EXCELENTE VISIBILIDAD

1 CARA DIAMANTADA

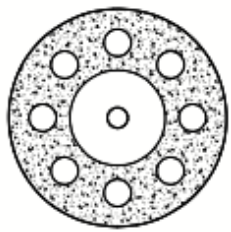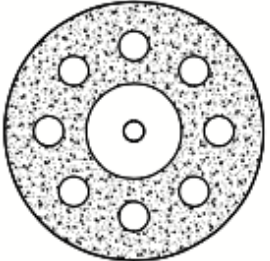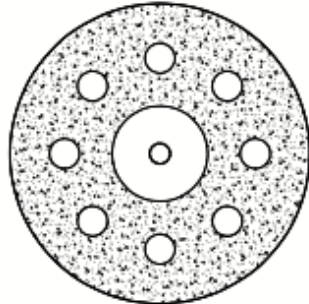  RA 204 P918 FLEX				
		○= ○=76μ ○=	○= ○=76μ ○=	○= ○=76μ ○=
Discs : Dicke / Thicknes / Épaisseur mm		0.25	0.25	0.25
Korngröße / Grit size / Taille du grain μ		160	190	220
ISO Ø 1/10 mm				
Order No. 		1	1	1
○ RA P918.204. ...		160	190	220

2 CARAS DIAMANTADAS

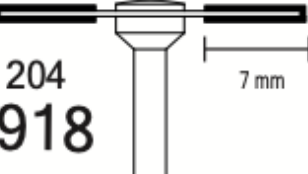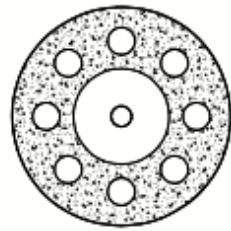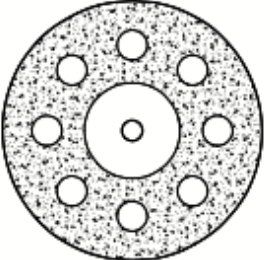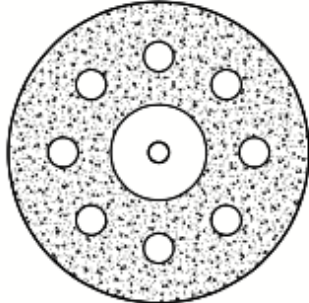  RA 204 PD918 FLEX				
		○= ○=76μ ○=	○= ○=76μ ○=	○= ○=76μ ○=
Discs : Dicke / Thicknes / Épaisseur mm		0.30	0.30	0.30
Korngröße / Grit size / Taille du grain μ		160	190	220
ISO Ø 1/10 mm				
Order No. 		1	1	1
○ RA PD918.204. ...		160	190	220




Distribuye:  606997834  965361020




DISCOS DIAMANTADOS MUY FINOS



RA 204
912

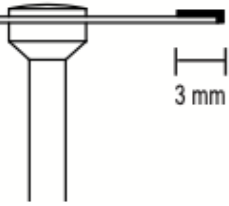

SUPERFLEX

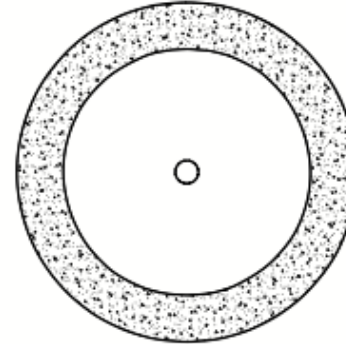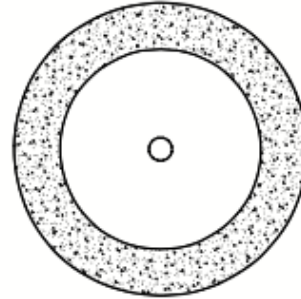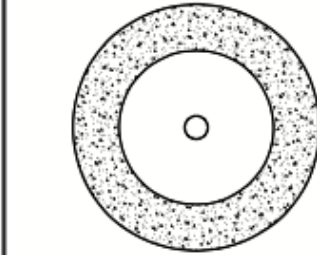

○= ○=46μ ○=
○=

○= ○=46μ ○=
○=

○= ○=46μ ○=
○=

Discs : Dicke / Thicknes / Épaisseur mm
Korngröße / Grit size / Taille du grain μ
ISO Ø 1/10 mm

0.15
160

0.15
190

0.15
220

Order No.



1

1

1

○ RA 912.204. ...


160

190




220



RA 204
X912

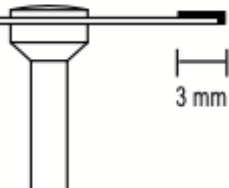

ULTRAFLEX

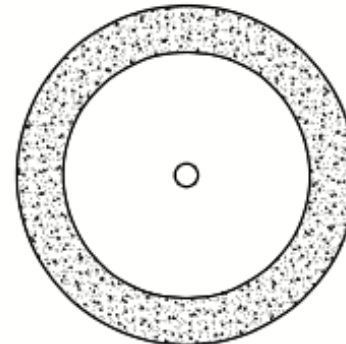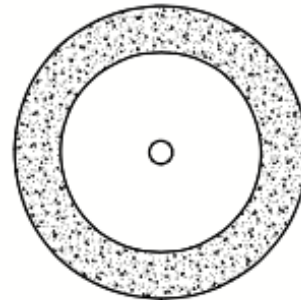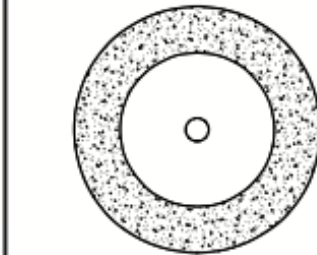

○= ○=30μ ○=
○=

○= ○=30μ ○=
○=

○= ○=30μ ○=
○=

Discs : Dicke / Thicknes / Épaisseur mm
Korngröße / Grit size / Taille du grain μ
ISO Ø 1/10 mm

0.10
160

0.10
190

0.10
220

Order No.



1

1

1

○ RA X912.204. ...

160

190

220







Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

~CORTAR METAL Y PLÁSTICO~



Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

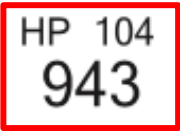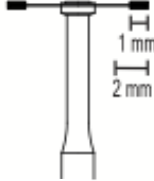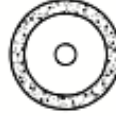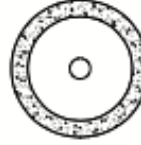 				
Mini - Discos		○= ○=46μ ○=	●=65μ ○=46μ ○=	●=65μ ○=46μ ○=
Discs : Dicke / Thicknes / Épaisseur mm		0.20 / 0.25	0.20 / 0.25	0.20 / 0.25
Korngröße / Grit size / Taille du grain μ		065	080	100
ISO Ø 1/10 mm				
Order No.		1/3/5	1/3/5	1
○	HP 943.104. ...	65	080	100
●	HP EF 943.104. ...			
●	HP F 943.104. ...			
●	HP G 943.104. ...		080	100
●	HP SG 943.104. ...			



• Uso en **boca/intraoral**

• Grano de **diamante natural**.

• Con un borde **más afilado** que los granos sintéticos o mixtos por lo que tienen **mejor rendimiento de corte**.



Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

**NUESTROS SETS DE ORTODONCIA ESTÁN DISEÑADOS
POR PROFESIONALES QUE CUENTAN CON MUCHOS
AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA ODONTOLOGÍA**

Puede escoger **el set entero** o la fresa
que más le guste en cajitas de **5 unidades**

EL STRIPPING RÁPIDO, SEGURO Y PRECISO



Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

NEW PROXIMAL CARE SET, Dr Iñaki Gamborena



LIMAS PROXO POR 2 CARAS DIAMANTADAS

G FD1 103 10 FD1 103 10 F FD1 103 10 EF FD1 103 10

LIMAS PROXO POR 1 CARA DIAMANTADA

G FE1 103 10 FE1 103 10 F FE1 103 10 EF FE1 103 10

- Limas de **diamante** gruesas y finas para el **Contra ángulo Eva**.
- Especiales para el **pulido interproximal** de **composites** y **stripping**.
- **Ni lesiona ni corta** tejidos blandos.



CLEAR ALIGNER COMPLEX SET
Dr. Pablo Echarri

REFERENCIAS SET CLEAR ALIGNER COMPLEX

Dr. Pablo Echarri





NEW SET STRIPPING
Dr. Joan Raga

REFERENCIAS NEW SET STRIPPING

Dr. Joan Raga





dentacare
SWISS DENTAL PRODUCTS

Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

PULIDORES RECONOCIDOS A NIVEL MUNDIAL, DESDE 1977

NO REQUIEREN PASTA DE PULIDO ADICIONAL



Venta en sets o 6
unidades de la
misma forma



Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

KENDA MICROFILL

Sistema de pulido en 2 pasos

- Es el pulidor **más vendido** para todo composite de microrelleno.
- Permite obtener superficies dentales con un alto brillo de larga duración.
- También indicado para quitar residuos de cemento de alambre de ortodoncia.



Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

KENDA DIAGUM

Sistema de pulido en 2 pasos

- El pulidor ultrafino diamantado obtiene un intenso brillo en **cerámica**.
- Para una óptima superficie de calidad y un alto brillo de larga duración.



Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

KENDA UNICUS

Sistema de pulido con diamante extrafino en 1 paso

- Para pulir todos los **composites** y **cerámicas híbridas** con un solo pulidor sin necesidad de cambiarlo.
- Consiga **ahorro de tiempo**.
- Ideal para restauraciones de **anteriores**.



Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020



Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

INSTRUMENTAL IMPRESCINDIBLE PARA PROFILAXIS



- EXPERIENCIA** (Más de 100 años fabricando instrumentos dentales artesanalmente)
- CALIDAD** (Solo hay 2 hornos especializados en el mundo en el tratamiento del acero: uno lo tiene Rolex y otro Deppeler)
- ARTESANÍA** (Todos los instrumentos son acabados a mano)
- PRECISIÓN** (Pasan por 15 puntos de control a mano en el proceso de producción)
- RESPALDADOS** (por las universidades, el aval de los líderes de opinión, la práctica clínica, y la experiencia de los clientes)



1) ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO

-Ni alergias ni intoxicaciones

2) MONOBLOQUE

-Sin soldaduras ni uniones:

- Más Precisión (como si el instrumento fuera una extensión de la mano)
- Más Higiénico



Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

3) MANGOS

- Grip no pegajoso
- Para hombres y mujeres
- Octogonal:
 - Respetar los dedos
 - Siempre estable, no rueda en la mesa



MANGO CN



MANGO CON ADEPS

4) SE PUEDEN AFILAR

5) NO ESTÁN RECUBIERTOS DE NINGUNA CAPA:

- No sueltan micropartículas en la boca del paciente.
- El filo es muchísimo mayor y duran hasta 5 veces más que la competencia.

6) BALANCE DEL PESO PERFECTO

- Diseñadas por ergonomistas:
 - Ni muy ligeras = (dan menos estabilidad)
 - Ni muy pesadas = dolor muñecas (síndrome túnel carpiano)

PROFILAXIS



Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020



■ RASPADORES

■ CURETASS

■ ESPEJOS

■ PINZAS

Exploradores

Gracias a las características únicas de nuestra materia prima, nuestros exploradores tienen una **vida útil inigualable**. Cada extremo de trabajo está acabado a mano para garantizar una punta perfectamente afilada.



Exploradores con doble terminación



PY151CN



Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

- Uso para todos los pacientes especialmente con **Brackets/ Retenedores/ Alineadores**.
- Diseñada para:
 - La eliminación de sarro supragingival especialmente en **dientes apiñados o superpuestos**.
 - La eliminación de sarro entre los **brackets y sobre el composite**.



- Uso para todos los pacientes
- Diseñada para la eliminación de sarro supragingival & modelar composite
- Solo 1 instrumento para toda la boca



Deppeler fue el creador del M23: **La navaja suiza** – Muchos la han copiado, ninguno la ha igualado

M23A®



Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

- Uso para todos los pacientes
- Diseñada para la eliminación de sarro en la parte **más supercifial** de la **zona subgingival**
- Solo 1 instrumento para toda la boca



ESPEJOS



Distribuye: ☎ 606997834 📠 965361020

- **Ergonómico** para el profesional & el paciente (no le hace daño al apoyarlo sobre su labio)
- **Recubrimiento de Rodio** (proporciona efecto antiadherente y resistente frente a ácidos)
- **Acero inoxidable satinado** (evita reflejos indeseados durante el uso clínico)
- **Higiénico** (Fabricado en una sola pieza, sin soldaduras donde puedan acumularse residuos)



Espejo por
ambas caras



2 opciones:

MIR-SDMS-N
Por una cara



MIR-DDMS-N
Por ambas caras



PINZAS



Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020



EZI70

Pinzas Fuertes



P96

Meriam



P10

College



P15

Punta con diamante
natural para mejor agarre
College



Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

MATERIAL PARA LABORATORIO

NEW LABORCARE ORTHODONTHICS HP

Dr Carlos Navarro



Set de laboratorio para ortodoncistas, recomendado para acrílico, metal y escayola.

SISTEMA DE PULIDO EN 3 PASOS PARA ACRÍLICOS PROTÉTICOS Y ORTODÓNTICOS



1º PASO= VERDE: Grano GRUESO

-Pulidor de silicona para el **acabado y contorneado**, para una reducción rápida del material.

-**Elimina rayaduras y alisa la superficie.** Indicado también para la corrección de acrílicos elásticos.



2º PASO = GRIS: Grano MEDIO

-Pulidor de silicona para **alisado y pulido** rápido de prótesis parciales y completas como también aparatos de ortodoncia.

-Genera un **ligero brillo**. Para preparar el pulido a alto brillo.



3º PASO = AMARILLO: Grano FINO

-Pulidor de silicona para **alisado y pulido** rápido de prótesis parciales y completas como también aparatos de ortodoncia.

-Genera un **alto brillo** sin pasta para pulir.

FRESAS DE CARBURO DE TUNGSTENO PARA LABORATORIO



HM23LR

-Permite un corte suave y controlado en **acrílicos**.



HM515

-Diseño afilado en tres lados para un corte fino en **acrílicos**. Perfecta para **trabajos de precisión en zonas estrechas**.



HM75G



HM79G

-Máxima eficiencia en **acrílico, metal y escayola**. Reducen **zonas de presión** con un fresado rápido y controlado.


LABORATORIO



HP 104
606

Fresa especial de diamante natural

Cono redonda, cabeza larga

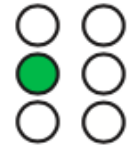

Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm	
ISO		Ø 1/10 mm	
Order No.			
○	HP	606.104. ...	045
●	HP EF	606.104. ...	
●	HP F	606.104. ...	
●	HP G	606.104. ...	045
●	HP SG	606.104. ...	



-Cepillo de pelo de cabra suave con cuero

-Ideal para el pre-pulido de metales preciosos, no preciosos, composites, acrílicos y titanio.

-Se utiliza con pasta de pulido para obtener un acabado uniforme y delicado antes del pulido final.

~CERÁMICA Y PLÁSTICO~



Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

Estándar - Discos rígidos				
Discs : Dicke / Thicknes / Épaisseur mm				
Korngröße / Grit size / Taille du grain μ				
ISO Ø 1/10 mm				
Order No.				
○	HP 910.104. ...			
●	HP EF 910.104. ...			
●	HP F 910.104. ...			
●	HP G 910.104. ...			
●	HP SG 910.104. ...			



• Uso en **laboratorio/extraoral**

- Grano de **diamante natural** y **perforado** para precorte, rectificado y contorneado de **cerámica y plástico** (Ej: alineadores)
- **Cortes limpios y suaves**, con alta precisión y transiciones pequeñas.
- Grosor **estándar / disco rígido**.

~CERÁMICA Y PLÁSTICO~



Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

Estándar - Discos rígidos		○= 30/91 ○=	○= 30/91 ○=	○= 30/91 ○=
Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm		0.50	0.50	0.50
Korngröße / Grit size / Taille du grain μ		160	190	220
ISO Ø 1/10 mm		1	1	1
Order No.		1	1	1
HP FEF 910Ch.104. ...				
HP GF 910Ch.104. ...		160	190	220
HP UGF 910Ch.104. ...				







• Uso en **laboratorio/extraoral**

- Grano de **diamante CHAMPION**, contiene 3 y 4 veces más diamante natural, **lo que maximiza su vida útil.**
- Cortes limpios y suaves **de cerámica y plástico**, con alta precisión y transiciones pequeñas.
- Grosor **estándar / disco rígido.**

~CERÁMICA Y PLÁSTICO~



Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

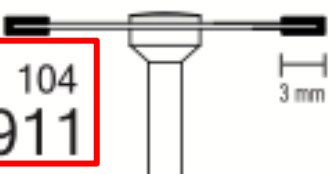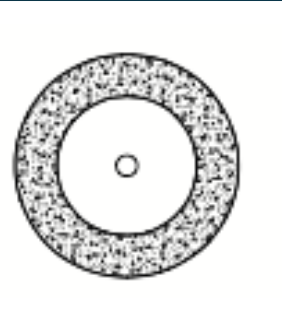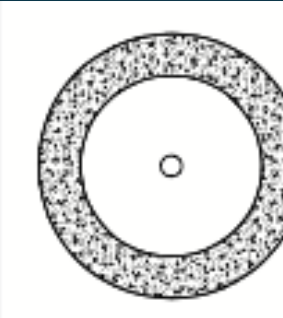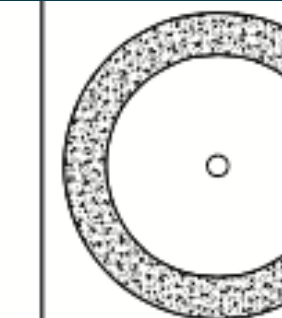
 HP 104 D911 							
Flex - Discos							
Discs : Dicke / Thicknes / Épaisseur mm		0.30		0.30		0.30	
Korngröße / Grit size / Taille du grain µ		160		190		220	
ISO Ø 1/10 mm		1		1		1	
Order No.		1		1		1	
HP D911.104. ...		160		190		220	
HP EF D911.104. ...							
HP F D911.104. ...							
HP G D911.104. ...							
HP SG D911.104. ...							



• Uso en laboratorio/extraoral

- Grano de **diamante natural** y **perforado** para precorte, rectificado y contorneado de **cerámica y plástico**.
- Disco **más fino / menos rígido**.
- Tiene una superficie de corte más pequeña porque la pieza en bruto es más delgada y **se desgasta más rápido al cortar que el HP 910**.

~CERÁMICA Y PLÁSTICO~

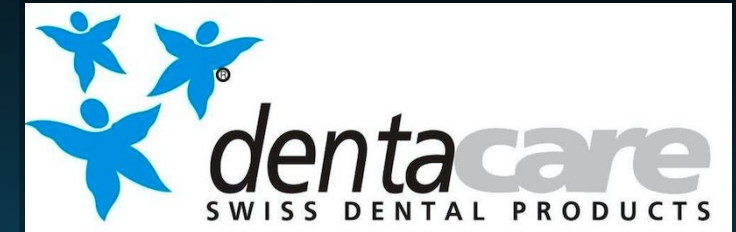

Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

Flex - Discos			
Discs : Dicke / Thicknes / Épaisseur mm			
Korngröße / Grit size / Taille du grain µ			
ISO Ø 1/10 mm			
Order No.			
HP FEF D911Ch.104. ...			
HP GF D911Ch.104. ...			
HP UGF D911Ch.104. ...			




• Uso en **laboratorio/extraoral**




- Grano de diamante **CHAMPION**, contiene 3 y 4 veces más diamante natural, lo que **maximiza su vida útil**. Para **cerámica y plástico**.
- Disco **más fino / menos rígido**.
- Tiene una superficie de corte más pequeña porque la pieza en bruto es más delgada y **se desgasta más rápido al cortar que el HP 910**.

~ METALES FERROSOS ~



Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

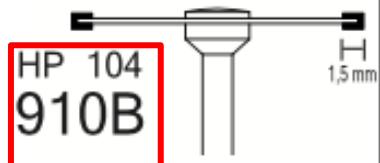

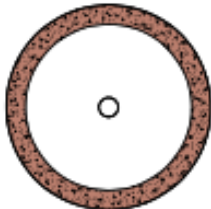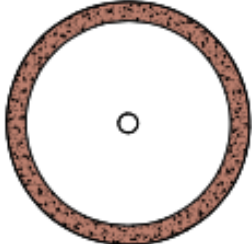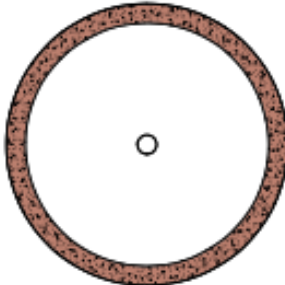		
 	 	 
$\bigcirc = 120\mu$	$\bigcirc = 120\mu$	$\bigcirc = 120\mu$
0.55 	0.55 	0.55 
160	190	220
1	1	1
160	190	220



- Uso en **laboratorio/extraoral**

- El disco de Borit es perfecto para todos los metales ferrosos. En comparación con los diamantes, no requieren refrigeración por agua hasta 1'200 °C.
- Rígido & Muy duradero.
- El grano de Borit **mantiene el filo durante toda la vida útil** por lo que supera a todos los demás granos sintéticos.



Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

Reciba su pedido en tan solo 24h