



dentacare
SWISS DENTAL PRODUCTS

“Tu empresa de confianza, con más de 35 años de experiencia en el sector”

Reciba su pedido en tan solo 24h:  606997834  965361020

Calle los quintos, 1 | 03350 Cox (Alicante)

comercial@dentacare.es



FORMAS Y USOS DEL PULIDOR



PUNTAS

Las puntas son ideales para pulir tanto la zona cervical como los surcos y relieves oclusales. Algunos sistemas disponen de hasta cuatro puntas y tamaños diferentes para satisfacer las preferencias de cada dentista.



COPAS

Hay tres tamaños de copa diferentes. Pueden utilizarse en diferentes áreas de aplicación, como en las inclinaciones de las cúspides de los dientes posteriores, en las áreas proximales de los ángulos de línea y en las superficies bucales, linguales y palatinas de las restauraciones anteriores.



DISCOS

Hay dos tipos de discos. Ambos son ideales en incisivos, grandes superficies de relleno, bordes incisales y zonas interproximales.



SHAPEGUARD

ShapeGuard está diseñado para adaptarse a múltiples aplicaciones con una sola forma. Gracias a las láminas flexibles, el pulidor ShapeGuard distribuye una presión uniforme. Un instrumento para todas las superficies. No es necesario cambiar de instrumento.



Pulidores para COMPOSITE (Pulido en 2 pasos)

9769M 9769F



2663 (KIT COMPLETO)



BEST SELLER

Referencia		2	2
	L mm	1,6	1,6
9769M	RA	100	
9769M	RA	140	
9769F	RA		100
9769F	RA		140

Nota: ¡Usar aplicando poca presión!

THE DENTAL ADVISOR




DENTAL ADVISOR'S TOP AWARD

Premiado y recomendado

Especial para el pulido de todas las restauraciones de composite, también en las zonas de difícil acceso.

- Láminas pulidoras flexibles
- Especial para las superficies de oclusión
- Respetuosos con el material
- Tiempos de pulido cortos
- Durabilidad extremadamente alta

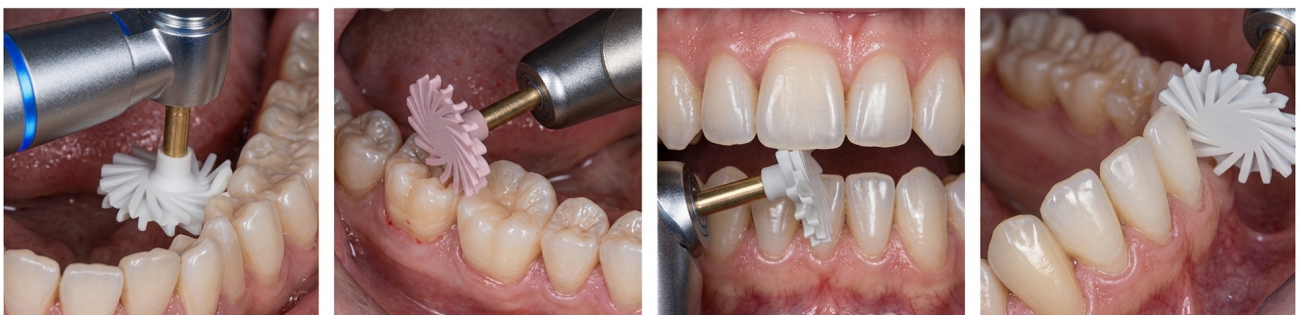

Las láminas flexibles de pulido permiten la adaptación a cada estructura superficial y ofrecen resultados sin defectos también en áreas de difícil acceso como es la superficie oclusal del diente o masticatoria.

Pulidores para CERÁMICA (Pulido de diamante en 4 pasos)

Especial para el pulido sencillo de todas las **restauraciones cerámicas**, también en las zonas de difícil acceso.

- Láminas pulidoras **flexibles**
- Especial para las superficies de oclusión
- Respetuosos con el material
- Tiempos de pulido **cortos**
- Durabilidad **extremadamente alta**

 **1º PASO: prepulido (grueso)**

 **2º PASO: pulido (mediano)**

 **3º PASO: pulido de brillo intenso (fino)**

 **4º PASO: pulido de alto brillo final (extra fino)**

9771G



9771M



9771F



9771C



REFERENCIA		2	2	2	2
L mm		1,6	1,6	1,6	1,6
9771G RA		100			
9771G RA		140			
9771M RA			100		
9771M RA			140		
9771F RA				100	
9771F RA				140	
9771C RA					100
9771C RA					140

Revoluciones recomendadas: 7.000 - 12.000 min⁻¹
Revoluciones máximas: 20.000 min⁻¹

KENDA

Grande en pulido. Enorme en **calidad**
Alto brillo científicamente probado en **menos tiempo.**

- **EXPERTOS EN PULIDORES DESDE 1977**
- **INNOVACIÓN**
- **SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS PROFESIONALES**
- **MÁXIMA CALIDAD SWISS MADE**




Vigilamos minuciosamente nuestro proceso de desarrollo

Métodos cuantitativos y cualitativos con inspección visual



Soluciones de pulido para diferentes aplicaciones y materiales

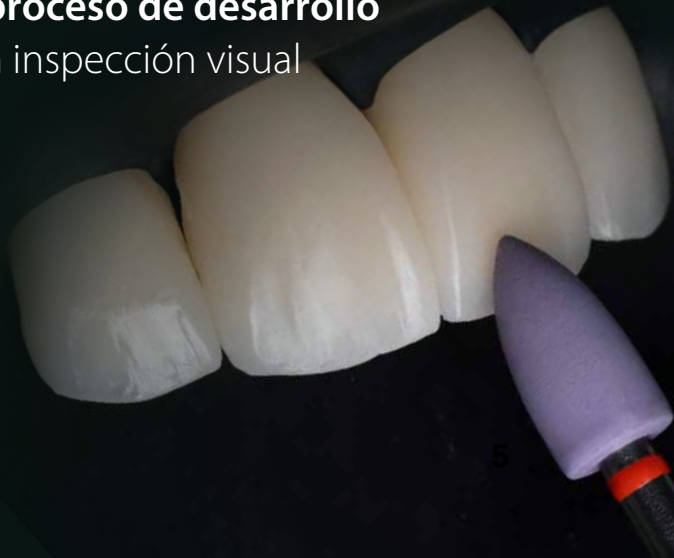

REF. SETS COMPLETOS Y LO QUE CONTIENEN							
0300.006	1	1	1	1	1	1	-
0300.002	-	-	-	-	1	1	-

- 1 Ilustración
- 2 Indicaciones de uso
- 3 **Pulidores de diamante**
- 4 Modelo de la forma de la cabeza y sistema de pulido
- 5 Número ISO
- 6 Tamaño del embalaje
- 7 Diámetro máximo de la cabeza en milímetros
- 8 Longitud de la cabeza en milímetros
- 9 Velocidad de rotación recomendada
- 10 Velocidad máxima de rotación
- 11 Números de REF. de sets variados con tamaño de envase
- 12 Número de cada instrumento dentro del set variado

ÍNDICE



TABLA DE CONTENIDOS

Página	Producto	Aplicación	Flexibilidad
8	KENDA MICROFILL	COMPOSITES MICRORRELLENOS	Flexible
9	♦ KENDA NOBILIS	TODOS LOS COMPOSITES Y CERÁMICAS HÍBRIDAS	Flexible
10	♦ KENDA UNICUS	TODOS LOS COMPOSITES Y CERÁMICAS HÍBRIDAS	Flexible
11	♦ KENDA MAXIMUS	TODOS LOS COMPOSITES Y CERÁMICAS HÍBRIDAS	Flexible
12	♦ KENDA DELUXE	TODOS LOS COMPOSITES Y CERÁMICAS HÍBRIDAS	Flexible
13	KENDA COMPLETO	TODOS LOS COMPOSITES, COMPÓMEROS, AMALGAMAS Y ORO	Flexible
14	♦ KENDA HYBRID	COMPOSITES Y CERÁMICAS HÍBRIDAS	Duro
15	KENDA C.G.I.	TODOS LOS COMPOSITES, COMPÓMEROS E IONÓMEROS DE VIDRIO	Flexible
16	KENDA PROPHY	LIMPIEZA Y PULIDO DENTAL	Flexible
17	♦ KENDA ALL CERAMIC	TODAS LAS CERÁMICAS	Flexible
18	♦ KENDA METALS	TODOS LOS METALES	Duro
19	♦ KENDA POLISHETTE	COMPOSITE Y CERÁMICA HÍBRIDA	Flexible, desechable

Todos los pulidores KENDA
contienen partículas
abrasivas y no necesitan
pasta de pulir.

PULIDORES DE COMPOSITES MICRORRELLENOS



KENDA MICROFILL

SISTEMA DE PULIDO EN 2 PASOS



- Diseñado para composites microrrelenos
- Sistema de pulido básico de eficacia probada en 2 pasos
- Disponible en una gran variedad de formas

Tipo de pulidor 6, 12, 25, 100 uds.	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006
	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012
	.025	.025	.025	.025	.025	.025	.025	.025	.025	.025	.025	.025
	.100	.100	.100	.100	.100	.100	.100	.100	.100	.100	.100	.100
Ø mm	5,5	10	6,5	3,3	5	6,4	5,5	10	6,5	3,3	5	6,4
L cabezal en mm	13	6,5	10	7,4	10	7,5	13	6,5	10	7,4	10	7,5
R. P. M.	Rec. 7500 - 10 000						5000 - 7500					
	Máx. 10 000						10 000					

MUY UTILIZADO EN ORTODONCIA

- Paso 1: quitar los restos de composite con fresa de carburo.
- Paso 2: pulidor amarillo en la forma que más se ajuste.
- Paso 3: pulidor azul en la forma que más se ajuste.



HM23R

Referencia set completo (1 pulidor de cada): 750

Sin necesidad de pasta de pulido, deja un brillo espectacular.

KENDA NOBILIS (SISTEMA DE PULIDO DIAMANTADO EN 1 PASO)

- Pulir todos los composites con el mismo pulidor
- Acabado y brillo sedoso en 1 solo paso
- Pulidor de diamante económico ideal para restauraciones posteriores
- Flexible, se adapta a la forma del diente
- Recomendación: Para restauraciones anteriores, utilice posteriormente los pulidores KENDA Maximus o KENDA Unicus para un pulido de alto brillo definitivo



Vídeo de aplicación
Nobilis + Unicus



ISO 858 206 243 513 055



ISO 858 205 304 513 100



ISO 858 206 030 513 065



ISO 852 206 248 515 033



ISO 858 205 543 512 140



ISO 858 206 250 513 050




ISO 858 206 030 513 090



Tipo de pulidor 6, 12, 20, 25, 100 uds.	0301	.006	0303	.006	0305	.006	0306	.006	0307	.006	0308	.006	0310	.006
		.012		.012		.012		.012		.012		.012		
		.025		.025		.025		.025		.020		.025		.025
		.100		.100		.100		.100		.100		.100		.100
Ø mm	5,5		10		6,5		3,3		14		5		9,2	
L cabezal en mm	13		6,5		10		7,4		2		10		8,3	
R. P. M.	Rec.	7500 - 10 000						5000 - 7000		7500 - 10 000				
	Máx.	10 000												

REF. (set)							
0300.006	1	1	1	1	1	1	-
0300.002	-	-	-	-	-	1	1

3050.006 **Set KENDA NOBILIS & UNICUS** ¡Ver página 22!

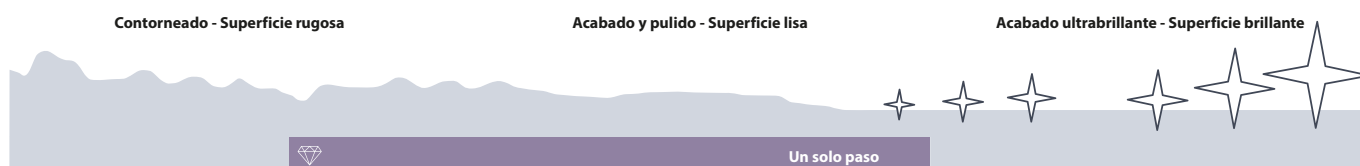

PULIDORES DE TODOS LOS COMPOSITES Y CERÁMICAS HÍBRIDAS

◆ PULIDORES DE DIAMANTES




KENDA UNICUS (SISTEMA DE PULIDO DIAMANTADO EN 1 PASO)

- Pulir todos los composites con el mismo pulidor
- Para un resultado estético de alto brillo
- Ideal para restauraciones anteriores
- No necesita pasta para pulido de alto brillo
- Recomendación: Utilizar instrumentos de acabado de grano fino o KENDA Nobilis antes de la aplicación



Vídeo de aplicación
Nobilis + Unicus

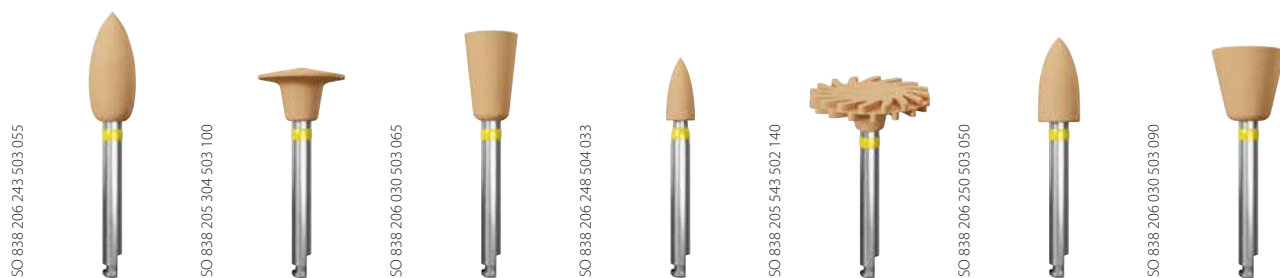

Tipo de pulidor 6, 12, 20, 25, 100 uds.	.006		.006		.006		.006		.006		.006		.006	
	.012		.012		.012		.012		.012		.012		.012	
	.025		.025		.025		.025		.020		.025		.025	
	.100		.100		.100		.100		.100		.100		.100	
Ø mm	5,5		10		6,5		3,3		14		5		9,2	
L cabezal en mm	13		6,5		10		7,4		2		10		8,3	
R. P. M.	Rec.	5000 - 7500							6000 - 8000		5000 - 7500			
	Máx.	10 000												

REF. (set)							
0350.006	1	1	1	1	1	1	-
0350.002	-	-	-	-	1	1	-

3050.006 Set KENDA NOBILIS & UNICUS ¡Ver página 22!



KENDA MAXIMUS (SISTEMA DE PULIDO DIAMANTADO EN 1 PASO)

- Pulido extremadamente eficaz y que ahorra tiempo en todos los composites
- De una superficie rayada a un brillo ultra luminoso en un solo paso
- Alto contenido en diamantes
- No necesita pasta para pulido de alto brillo
- Indicado para microhíbridos y nanorrellenos



"Este pulidor ha demostrado dar un brillo significativamente mejor y una superficie más fina".



Vídeo de aplicación
Nobilis+Maximus



Tipo de pulidor 6, 12, 20, 25, 100 uds.	0381	.006	0383	.006	0385	.006	0386	.006	0387	.006	0388	.006	0390	.006
		.012		.012		.012		.012		.012		.012		
		.025		.025		.025		.025		.020		.025		
		.100		.100		.100		.100		.100		.100		
Ø mm		5,5		10		6,5		3,3		14		5		9,2
L cabezal en mm		13		6,5		10		7,4		2		10		8,3
R. P. M.	Rec.	5000 - 7500						6000 - 8000		5000 - 7500				
	Máx.	10 000												

REF. (set)							
0380.006	1	1	1	1	1	1	-
0380.002	-	-	-	-	1	1	-



Contorneado - Superficie rugosa

Acabado y pulido - Superficie lisa

Acabado ultrabrillante - Superficie brillante



KENDA DELUXE (SISTEMA DE PULIDO DIAMANTADO EN 2 PASOS)

- Combinación de lujo de doble diamante para el pulido estético y de alto brillo en todas las restauraciones de composite
- Excelente elección para odontología estética
- No necesita pasta adicional para pulido de alto brillo



Vídeo de aplicación

 						 														
 ISO 858 206 030 513 065						 ISO 838 206 030 503 065														
 ISO 852 206 248 515 033						 ISO 838 206 248 504 033														
 ISO 858 205 543 512 140						 ISO 838 205 543 502 140														
 ISO 858 206 250 513 050						 ISO 838 206 250 503 050														
 ISO 858 205 304 513 100						 ISO 838 205 304 503 100														
Tipo de pulidor 6, 12, 20, 25, 100 uds.	0405	.006	0406	.006	0407	.006	0408	.006	0409	.006	0455	.006	0456	.006	0457	.006	0458	.006	0459	.006
		.012		.012		.012		.012		.012		.012		.012		.012				
		.025		.025		.020		.025		.020		.025		.020		.025		.025		
		.100		.100		.100		.100		.100		.100		.100		.100		.100		
Ø mm	6,5		3,3		14		5		10		6,5		3,3		14		5		10	
L cabezal en mm	10		7,4		2		10		5,5		10		7,4		2		10		5,5	
R. P. M.	Rec.	7500 - 10 000			5000 - 7000		7500 - 10 000			5000 - 7500			6000 - 8000		5000 - 7500					
	Máx.	10 000																		

REF. (set)									
0400.012	1	2	1	1	1	1	2	1	1
0400.003	-	-	1	1	-	-	-	1	-

Contorneado - Superficie rugosa


Acabado y pulido - Superficie lisa

Acabado ultrabrillante - Superficie brillante



KENDA COMPLETO (SISTEMA DE PULIDO EN 2 PASOS)

- Sistema multifuncional equilibrado para una amplia gama de materiales de restauración
- Pulidores económicos con abrasivos de alto rendimiento
- Disponible en las formas más habituales
- Mayor brillo en comparación con otros sistemas Kenda sin diamante
- Puede utilizarse para eliminar residuos de cemento tras la fijación de la restauración
- Adecuado para eliminar residuos de composite tras tratamientos de ortodoncia o alineadores

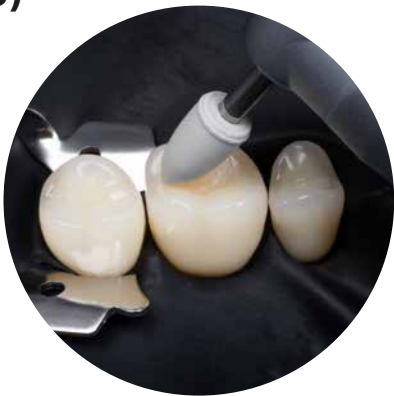


Vídeo de aplicación



Tipo de pulidor 6, 12, 25, 100 uds.	0505	.006	0508	.006	0509	.006	0510	.006	0555	.006	0558	.006	0559	.006	0560	.006
		.012		.012		.012		.012		.012		.012		.012		.012
		.025		.025		.025		.025		.025		.025		.025		.025
		.100		.100		.100		.100		.100		.100		.100		.100
Ø mm																
	6,5	5	10	9,2	6,5	5	10	9,2								
L cabezal en mm	10	10	5,5	8,3	10	10	5,5	8,3								
R. P. M.	Rec.	7500 - 10 000							5000 - 7500							
	Máx.	10 000							10 000							

REF. (set)								
0500.012A	2	2	2	-	2	2	2	-
0500.002	-	1	-	-	-	1	-	-

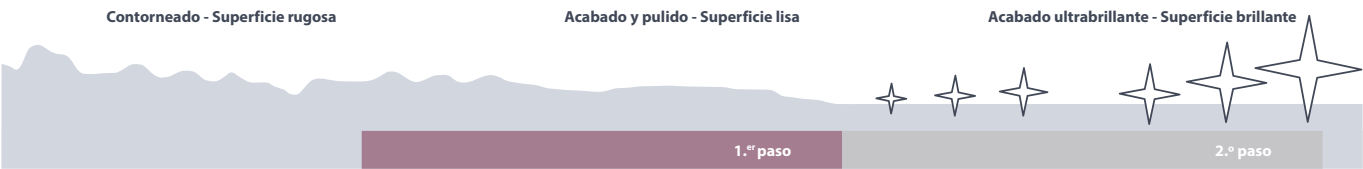

PULIDORES DE TODOS LOS COMPOSITOS Y CERÁMICAS HÍBRIDAS

PULIDORES DE DIAMANTES

KENDA HYBRID (SISTEMA DE PULIDO DIAMANTADO EN 2 PASOS)

- Desarrollado para composites híbridos y cerámicos
- El pulidor firme y robusto facilita los ajustes exactos
- El prepulidor sin diamante y el pulidor de alto brillo con diamante de Kenda son la mejor combinación económica para obtener resultados altamente estéticos
- Proporciona superficies ultrasuaves de alto brillo



Vídeo de aplicación



																																															
																																															
Tipo de pulidor 6, 12, 20, 25, 100 uds.						.006		.006		.006		.006		.006		.006		.006		.006		.006		.006		.006		.006		.006																	
						.012		.012		.012		.012		.012		.012		.012		.012		.012		.012		.012		.012		.012		.012															
						.025		.025		.020		.025		.025		.025		.025		.025		.025		.025		.025		.025		.025		.025															
						.100		.100		.100		.100		.100		.100		.100		.100		.100		.100		.100		.100		.100		.100															
Ø mm						6,5		3,3		14		5		10		6,5		3,3		14		5		10		6,5		3,3		14																	
L cabezal en mm						10		7,4		2		10		5,5		10		7,4		2		10		5,5		10		7,4		2																	
R. P. M.						Rec.		7500 - 10 000				5000 - 7000				7500 - 10 000				5000 - 7500				6000 - 8000				5000 - 7500																			
						Máx.		10 000										10 000																													

REF. (set y mues- tras)										
0100.012	1	2	1	1	1	1	2	1	1	-
0100.003	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-



PULIDORES DE TODOS LOS COMPOSITES, COMPÓMEROS E IONÓMEROS DE VIDRIO

KENDA C.G.I. (SISTEMA DE PULIDO EN 3 PASOS)

- Sistema de pulido integral con tres granos
- Abarca todo el proceso, desde el contorneado y el acabado hasta el pulido de brillo
- Flexible, se adapta a la forma del diente
- El pulidor blanco elimina rápidamente el exceso de material
- Puede utilizarse para eliminar residuos de cemento tras la fijación de la restauración
- Adecuado para eliminar residuos de composite tras tratamientos de ortodoncia o alineadores



Vídeo de aplicación



Tipo de pulidor 6, 12, 20, 25, 100 uds.	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006	
	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012	
	.025	.020	.025	.025	.025	.025	.020	.025	.025	.025	.025	.025	.025	.025	.025	
	.100	.100	.100	.100	.100	.100	.100	.100	.100	.100	.100	.100	.100	.100	.100	
Ø mm	6,5	14	5	10	9,2	6,5	14	5	10	9,2	6,5	14	5	10	9,2	
L cabezal en mm	10	2	10	5,5	8,3	10	2	10	5,5	8,3	10	2	10	5,5	8,3	
R. P. M.	Rec.	7500 - 10 000	5000 - 7000	7500 - 10 000		3000 - 7500	6000 - 8000	3000 - 7500		3000 - 7500	6000 - 8000	3000 - 7500		3000 - 7500	6000 - 8000	
	Máx.	10 000				10 000				10 000				10 000		

REF. (set)															
900.012	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-
900.ASS.012	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1
AD 900.ASS.006	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-
AD 900.ASS.007	1	-	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-
SA900.ASS.012	2	-	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	2	-	-
907.003	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
908.003	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-



PULIDORES DE PROFILAXIS


KENDA PROPHY (SISTEMA DE PULIDO EN 1 PASO)

- Para la limpieza dental en esmalte natural
- Puede utilizarse para reducir las manchas extrínsecas sin pasta de pulir
- El grano abrasivo fino ya está intercalado en el cabezal
- Diseño firme para facilitar el control durante el pulido
- Adecuado para eliminar residuos de composite tras tratamientos de ortodoncia o alineadores



	ISO 638 206 030 523 065			ISO 632 206 248 525 033		ISO 638 206 250 523 050		ISO 638 206 030 523 090	
Tipo de pulidor 6, 12, 25, 100 uds.	5105	.006	5106	.006	5108	.006	5110	.006	
		.012		.012		.012		.012	
		.025		.025		.025		.025	
		.100		.100		.100		.100	
Ø mm		6,5		3,3		5		9,2	
L cabezal en mm		10		7,4		10		8,3	
R. P. M.	Rec.	7500 - 10 000							
	Máx.	10 000							

REF. (set)				
5100.012	3	3	3	3

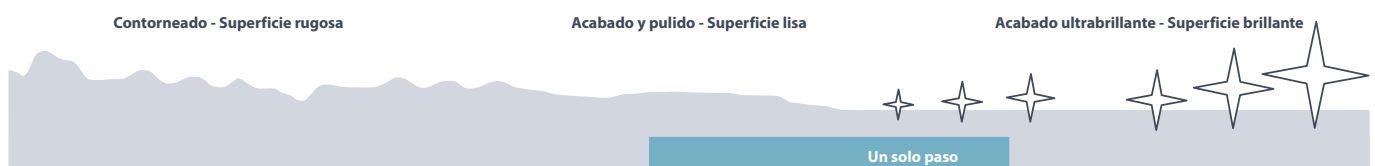

KENDA ALL CERAMIC (SISTEMA DE PULIDO DIAMANTADO EN 3 PASOS)

- Pulidor para todas las restauraciones cerámicas, incluyendo circonio y disilicato de litio
- El primer paso para el acabado rugoso, el segundo y el tercero, para el pulido y el pulido de alto brillo



La ciencia del pulido cerámico:

- Se ha informado de que las superficies pulidas son más suaves para el diente antagonista que con el glaseado.¹
- Además, se ha demostrado que el pulido de la cerámica mejora sus propiedades mecánicas.²



Vídeo de aplicación



Tipo de pulidor 6, 12, 20, 25, 100 uds.	ISO 872 206 030 535 065					ISO 862 206 030 525 065					ISO 858 206 030 514 065				
	ISO 872 206 248 535 033					ISO 862 206 248 525 033					ISO 858 206 248 514 033				
	ISO 878 205 543 532 140					ISO 868 205 543 522 140					ISO 858 205 543 512 140				
	ISO 872 206 250 535 050					ISO 862 206 250 525 050					ISO 858 206 250 514 050				
	ISO 872 205 304 535 100					ISO 862 205 304 525 100					ISO 858 205 304 514 100				
Ø mm	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006
	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012
	.025	.025	.020	.025	.025	.025	.025	.020	.025	.025	.025	.020	.025	.025	.025
	.100	.100	.100	.100	.100	.100	.100	.100	.100	.100	.100	.100	.100	.100	.100
L cabezal en mm	6,5	3,3	14	5	10	6,5	3,3	14	5	10	6,5	3,3	14	5	10
	10	7,4	2	10	5,5	10	7,4	2	10	5,5	10	7,4	2	10	5,5
R. P. M.	Rec. 7500 - 10 000					Rec. 7500 - 10 000					Rec. 5000 - 7500				
	Máx. 10 000					Máx. 10 000					Máx. 10 000				

REF. (set)															
0200.012	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1



¹ Janyavula S, Lawson N, Cakir D, Beck P, Ramp LC, Burgess JO (2013) The wear of polished and glazed zirconia against enamel. J Prosthet Dent 109:22-29. [https://doi.org/10.1016/S0022-3913\(13\)00000-0](https://doi.org/10.1016/S0022-3913(13)00000-0)

² Vohra M, Pandurangan KK, Shenoy A, Keskar V. A Comprehensive Review of the Surface and Chromatic Properties of Monolithic Zirconia: Evaluating the Impact of Polishing and Finishing Methods on Aesthetics and Performance. Cureus. 2024 Aug 2;16(8):e66029. doi: 10.7759/cureus.66029. PMID: 39221297; PMCID: PMC11366407.




KENDA METALS (SISTEMA DE PULIDO EN 2 PASOS)

- Solución de pulido estético para todos los metales
- Combinación económica de prepulidor sin diamante y pulidor de alto brillo con diamante
- Resultados de brillo espejo



																	
																	
																	
																	
																	
Tipo de pulidor 6, 12, 20, 25, 100 uds.	0115	.006	0116	.006	0118	.006	0119	.006	1115	.006	1116	.006	1118	.006	1119	.006	
		.012		.012		.012		.012		.012		.012		.012		.012	
		.025		.025		.025		.025		.025		.025		.025		.025	
		.100		.100		.100		.100		.100		.100		.100		.100	
		Ø mm		6,5		3,3		5		10		6,5		3,3		5	10
L cabezal en mm	10	7,4	10	5,5	10	7,4	10	5,5	10	7,4	10	5,5	10	7,4	10	5,5	
R. P. M.	Rec.	7500 - 10 000								5000 - 7500							
	Máx.	10 000								10 000							

REF. (set)								
1000.006	1	-	1	1	1	-	1	1
1000.012	2	2	1	1	2	2	1	1
1000.002	-	-	1	-	-	-	1	-

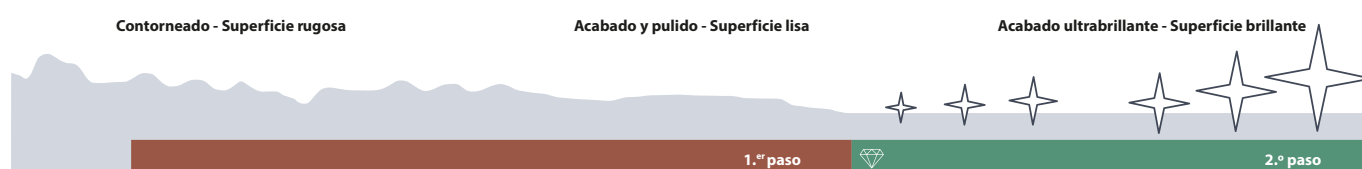

PULIDORES CLÍNICOS DE UN SOLO USO


Los pulidores presentan un mango de polímero de alto rendimiento, en ángulo recto y esterilizable en autoclave, y deben desinfectarse y esterilizarse antes del primer uso. Esterilizar en autoclave a 132° C / 270° F.



Pulidores para uso intraoral en un solo paciente. Reduce el riesgo de contaminación cruzada.



Los pulidores de un solo uso siempre hacen que el procedimiento de pulido comience con un pulidor de forma perfecta para un pulido más preciso.

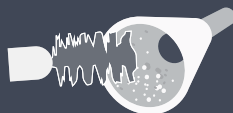

Sin necesidad de limpieza ni reprocesamiento.

N

Aplique poca presión
1,5 N

MD

Clase de producto sanitario IIa



Pulidores de uso intraoral para múltiples pacientes



KENDA Polishette (SISTEMA DE PULIDO EN 3 PASOS)

- Adecuado para el contorneado, acabado y pulido de alto brillo de todo tipo de composites
- Se puede aplicar sin pasta de pulir.
- Los pulidores en miniatura con cuello de mango cónico garantizan un manejo preciso y sencillo, incluso en zonas de difícil acceso y para pacientes con cavidad bucal pequeña
- Excelente acceso y visibilidad
- Un solo uso para mayor comodidad, menos tiempo de limpieza y formas siempre perfectas
- Los eliminadores del primer escalón podrían sustituir a los ajustes de diamante y carburo
- Produce un brillo superior en comparación con el sistema tradicional de pulido en varios pasos¹
- Permite una reducción significativa del tiempo de consulta en la clínica y un pulido más rápido¹




Vídeo de aplicación



Tipo de pulidor 6, 15, 30 uds.	ISO 658 245 030 533 065		ISO 658 246 248 523 030		ISO 638 245 030 523 065		ISO 638 246 248 523 030		ISO 838 245 030 503 065		ISO 838 246 248 503 030	
	PS715C	.006	PS716C	.006	PS715M	.006	PS716M	.006	PS715F	.006	PS716F	.006
Ø mm	-	.030	-	.030	-	.030	-	.030	-	.015	-	.015
L cabezal en mm	6,4	3	6,4	3	6,4	3	6,4	3	6,4	3	6,4	3
R. P. M.	Rec.	5000 - 7500	5000 - 7500	5000 - 7500	5000 - 7500	5000 - 7500	5000 - 7500	5000 - 7500	5000 - 7500	5000 - 7500	5000 - 7500	5000 - 7500
	Máx.	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500

REF. (set)	1	2	3	4	5	6
PS710X.006	1	1	1	1	1	1
PS710X.024	5	5	5	5	2	2
PS715X.024	10	-	10	-	4	-
PS716X.024	-	10	-	10	-	4
PS715X.003	1	-	1	-	1	-

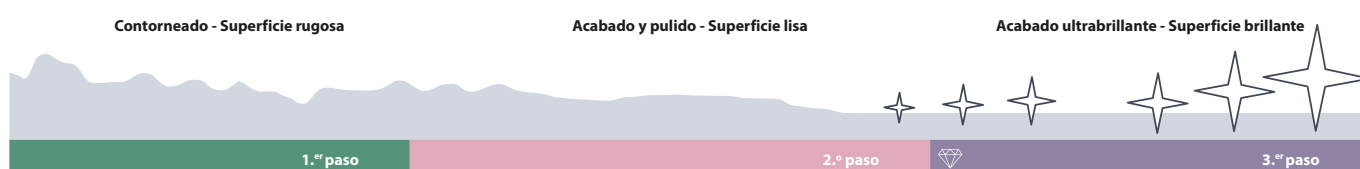

¹ Dennis T, Zoltie T, Wood D, Altaie A. Reduced-step composite polishing systems - a new gold standard? J Dent. 2021 Sep;112:103769. doi: 10.1016/j.jdent.2021.103769. Epub 2021 Aug 5. PMID: 34363894.

PULIDORES DE TODOS LOS COMPOSITES Y CERÁMICAS HÍBRIDAS

SETS MIXTOS KENDA



Set KENDA NOBILIS & UNICUS



Nombre pedido		3050.006 Set KENDA NOBILIS & UNICUS					
Tipo de pulidor		0303	0305	0306	0308	0355	0358
Unidades		1	1	1	1	1	1
		10	6,5	3,3	5	6,5	5
L cabezal en mm		6,5	10	7,4	10	10	10
R. P. M.	Rec.	7500 - 10 000				5000 - 7500	
	Máx.	10 000					

SISTEMAS DE PULIDO



SISTEMA DE PULIDO EN 1 PASO

Este sistema contiene un único pulidor que suele tener partículas de diamante como abrasivo. Consigue buenos resultados de pulido únicamente mediante la aplicación de presión alterada por parte del dentista. El usuario pule previamente con más presión y consigue un brillo intenso reduciendo la presión. Este es el método más eficaz en cuanto al tiempo necesario.

SISTEMA DE PULIDO EN 2 PASOS

Este es el sistema de pulido más utilizado. Solo contiene dos pulidores: un prepulidor de grano medio y un pulidor de alto brillo de grano fino.



SISTEMA DE PULIDO EN 3 PASOS

El sistema de pulido en tres pasos viene con tres pulidores de diferentes tamaños de grano.



1º paso consiste en eliminar el exceso de material y contornear la restauración para prepararla para el pulido.



2º paso consiste en alisar la superficie.



3º y último paso da a la restauración un acabado de alto brillo.

CONSTRUCCIÓN DE UN PULIDOR DENTAL



Cabezal de pulido

1

El cabezal de pulido está compuesto de silicona o goma sintética mezclada con partículas abrasivas de diamante, carburo de silicio u óxido de aluminio. Las distintas mezclas proporcionan los efectos de pulido requeridos.

Anillo de color

3

Los anillos de colores del mango indican los diferentes tamaños de grano de diamante según la norma ISO 21671.


Tamaño de grano de color en micras

	ultrafino 4 - 1 μ
	extrafino 8 - 4 μ
	fino 32 - 8 μ
	medio 69 - 32 μ
	grueso 164 - 69 μ
	muy grueso >164 μ

Mango

2

El mango de los pulidores puede ser de acero inoxidable o de plástico, de un solo uso o de varios, respectivamente.

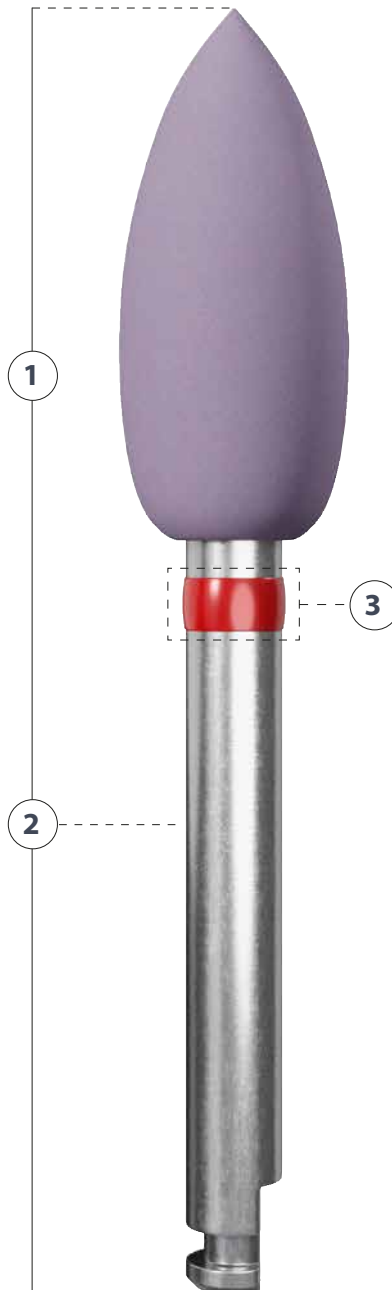

Contraángulo RA Ø 2,35 mm

